

# WIDEX **MOMENT™**

## NÁVOD K POUŽITÍ **ŘADA WIDEX MOMENT™**

Model M-CIC-M/M-CIC-M TR  
CIC  
(zvukovodové sluchadlo)



**WIDEX®**  
HIGH DEFINITION HEARING

# VAŠE SLUCHADLO

(Vyplní sluchadlový odborník.)

Ventilační ka-  Krátký nálek:

V celé délce

Žádný

Toto je seznam možných programů vašeho sluchadla. Další informace o použití těchto programů naleznete v části Programy pod položkou Přizpůsobení.

## Programy vašeho sluchadla:

PROGRAMY	ROZŠÍŘENÍ SLYŠITELNOSTI
<input type="checkbox"/> Univerzální	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ticho	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Komfort	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Automobil	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Město	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Řeč v hluku	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Restaurace	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Společnost	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Hudba	<input type="checkbox"/>

**SPECIÁLNÍ PROGRAMY** Zen Telefon**ROZŠÍŘENÍ SLYŠITELNOSTI****PROGRAMY+** Zen+**ROZŠÍŘENÍ SLYŠITELNOSTI**

Názvy programů v tabulce jsou ve výchozím nastavení. Pokud se rozhodnete používat některé jiné dostupné názvy, vepište tyto nové názvy do tabulky. Díky tomu budete vždy vědět, které programy ve svém sluchadle máte.

**POZNÁMKA**

Než začnete sluchadlo používat, důkladně si přečtete tento návod.

**POZNÁMKA**

Toto sluchadlo lze používat bezdrátově s aplikací TONELINK. Naše společnost nenese žádnou zodpovědnost v případě použití sluchadla s aplikacemi jiných společností ani v případě použití aplikace TONELINK s nepodporovanými zařízeními.

# OBSAH

<b>DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....</b>	<b>6</b>
<b>VAŠE SLUCHADLO.....</b>	<b>8</b>
Vítejte.....	8
Základní informace o vašem sluchadle.....	8
<b>PODMÍNKY POUŽITÍ.....</b>	<b>10</b>
Indikace k použití.....	10
Zamýšlené použití.....	10
Provozní podmínky.....	11
Skladovací a přepravní podmínky.....	11
<b>BĚŽNÉ POUŽITÍ.....</b>	<b>13</b>
Vypínání a zapínání sluchadla.....	13
Nasazení a sejmutí sluchadla.....	14
<b>BATERIE.....</b>	<b>15</b>
Signalizace slabé baterie.....	15
Výměna baterie.....	15
<b>PŘÍZPŮSOBNÍ.....</b>	<b>17</b>
Programy.....	17
Program Zen.....	19
Změna programů.....	19
Zvukové signály.....	19

<b>ČIŠTĚNÍ.....</b>	<b>20</b>
Nástroje.....	20
Jak čistit sluchadlo.....	20
Ochrana před ušním mazem (filtr).....	23
<b>ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.....</b>	<b>26</b>
<b>INFORMACE O PŘEDPÍSECH.....</b>	<b>28</b>
Prohlášení k nařízením FCC a ISED.....	28
Informace týkající se likvidace.....	30
<b>SYMBOLY.....</b>	<b>31</b>

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Než začnete své sluchadlo používat, důkladně si přečtěte následující informace.



**Sluchadla nebo baterie mohou být nebezpečné, pokud dojde k jejich spolknutí nebo nesprávnému použití. Nesprávné použití nebo spolknutí může být příčinou vážného poranění nebo dokonce úmrtí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.**



Když sluchadla nepoužíváte, vyjměte je z uší. Zvukovod ucha bude moci větrat a zamezíte jeho případné infekci.



Pokud se domníváte, že se u vás rozvinula infekce ucha nebo alergická reakce, ihned kontaktujte sluchadlového odborníka.



Pokud je vám sluchadlo nepohodlné nebo neseďí správně, dochází k podráždění, zarudnutí apod., obraťte se na sluchadlového odborníka.



Před sprchováním, plaváním nebo použitím fénu na vlasy sluchadla vyjměte z uší.



Nenoste sluchadla během aplikace parfému, spreje, gelů, pleťové vody nebo krému.



Nesušte sluchadlo v mikrovlnné troubě – zničí by se.



Nikdy nepoužívejte sluchadla jiných osob a nikdy nedovolte, aby kdokoli používal vaše sluchadlo, neboť by mohlo dojít k poškození sluchu.



Nikdy nepoužívejte sluchadla v prostředí, kde mohou být přítomny výbušné plyny, např. v dolech apod.



**Uchovávejte sluchadla, jejich součásti, doplňky a baterie mimo dosah dětí a mentálně postižených osob.**



Nikdy se sami nesnažte sluchadlo rozebírat nebo opravovat. Potřebujete-li sluchadlo opravit, obraťte se na sluchadlového odborníka.



Vaše sluchadla obsahují radiokomunikační technologii. Vždy věnujte dostatečnou pozornost tomu, v jakém prostředí je používáte. Pokud platí nějaká omezení, učiňte vhodná bezpečnostní opatření.



Vaše zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo mezinárodním normám týkajícím se elektromagnetické kompatibility. Nelze však vyloučit, že bude způsobovat rušení jiných elektrických zařízení. Pokud dojde k rušení, udržujte od jiných elektrických zařízení patřičný odstup.



Nevystavujte sluchadla extrémním teplotám ani vysoké vlhkosti. Pokud zvlhnou nebo se silně zpotíte, rychle je vysušte.

# VAŠE SLUCHADLO


## Vítejte

Blahopřejeme vám k pořízení nového sluchadla.


Používejte sluchadlo pravidelně, i když vám bude nějaký čas trvat si na ně zvyknout. Budete-li jej používat jen zřídka, s největší pravděpodobností nebudete mít ze sluchadla maximální užitek.

Sluchadlo a jeho příslušenství nemusí vypadat přesně tak, jak znázorňují ilustrace v této brožuře. Vyhrazuji si právo provádět změny, které považujeme za nezbytné.

## Základní informace o vašem sluchadle

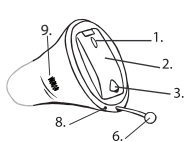

1. Mikrofonní vstupy
2. Bateriové víčko (funkce zapnout/vypnout)
3. Výstupek pro nehet
4. Zvukový výstup

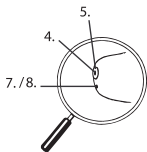

5. Ochrana před ušním mazem - filtr
6. Vytahovací strunka
7. /8. Ventilační kanálek uvolňující přetlak (krátký)
8. Ventilační kanálek uvolňující přetlak (v celé délce)
9. Rozlišení pravého a levého sluchadla



Pravé a levé sluchadlo je barevně odlišeno. Sluchadlo pro levé ucho má modrou značku. Sluchadlo pro pravé ucho má červenou značku.

# PODMÍNKY POUŽITÍ

## Indikace k použití

Sluchadla jsou určena pro jedince starší 36 měsíců s rozsahem ztráty sluchu od minimální (10 dB HL) po těžkou (90 dB HL) a v konfiguracích pro úplnou ztrátu sluchu.

Jsou naprogramována kvalifikovanými odborníky na léčbu sluchu (audiology, odborníky na sluchadla, otorinolaryngology), kteří jsou vyškoleni v léčbě sluchu.

## Zamýšlené použití

Sluchadla jsou určena jako zařízení zesilující vedení zvuku vzduchem a používají se ke každodennímu poslechu v běžném prostředí. Sluchadla mohou být vybavena programem Zen, který poskytuje relaxační zvukový podklad (tj. zdroj hudby nebo šumu) pro dospělé osoby, které si přejí tento zvuk poslouchat v tichém prostředí.

## Provozní podmínky

Vaše sluchadla byla navržena k použití v každodenních situacích a fungují správně za podmínek okolního prostředí, které jsou vám pohodlné. Sluchadla můžete používat v letadle, ale měli byste je odkládat před sprchováním či plaváním.

### Konkrétní provozní podmínky pro sluchadla:

	Minimální	Maximální
teplota	0 °C	50 °C
Relativní vlhkost	10 %	95 %
Atmosférický tlak	750 mbarů	1060 mbarů

### Skladovací a přepravní podmínky

Sluchadla jsou citlivá na extrémní podmínky, tedy například na vysoké teploty. Nesmí se skladovat ani přepravovat na přímém slunci, nýbrž výhradně za následujících podmínek.

### Zvláštní skladovací a přepravní podmínky:

	Minimální	Maximální
teplota	-20 °C	55 °C

	<b>Minimální</b>	<b>Maximální</b>
<b>Relativní vlhkost</b>	10 %	95 % (relativní)

Technické specifikace a další informace o svých sluchadlech naleznete na adrese <https://global.widex.com>.

## BĚŽNÉ POUŽITÍ

### Vypínání a zapínání sluchadla



Chcete-li sluchadlo zapnout, zavřete kryt baterie. Pokud sluchadlový odborník tuto funkci nedeaktivoval, vydá sluchadlo zvukový signál značící jeho zapnutí.



Chcete-li sluchadlo vypnout, otevřete kryt baterie.

### POZNÁMKA

Zapnutí sluchadla můžete rovněž ověřit uzavřením v dlaní. Pokud je zapnuté, zazpíská. Pokud sluchadlo nepoužíváte, nezapomeňte je vypnout.


## Nasazení a sejmutí sluchadla



Zcela zavřete kryt baterie. Podržte sluchadlo palcem a ukazovákem a pomalu jej zavádějte do ucha, dokud neucítíte odpor.

Poté sluchadlo jemně zatlačte špičkou ukazováku do ucha, dokud to nebude pohodlné.

Při zavádění sluchadla si můžete pomoci taháním ušního boltce nahoru a dolů.

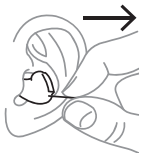

Chcete-li sluchadlo vyjmout, použijte vytahovací strunku.

### POZNÁMKA

Pokud nelze sluchadlo snadno vyjmout, táhněte za strunku a při tom opatrně kývejte sluchadlem ze strany na stranu.

# BATERIE

Do sluchadla používejte **baterii č. 10 typu zinek-vzduch** .

Vždy použijte čerstvou, novou baterii, kterou Vám doporučil sluchadlový odborník.

## POZNÁMKA

Před vložením do sluchadla zkontrolujte, že je baterie zcela čistá a nejsou na ní žádné zbytky lepidla ze štítku. V opačném případě sluchadlo nemusí fungovat dle očekávání.



Baterie do sluchadla se nikdy nepokoušejte znovu dobíjet, protože by mohly explodovat.



Při skladování sluchadel v nich nikdy neponechávejte vybité baterie. Mohly by vytéct a Vaše sluchadlo zničit.



Použité baterie zlikvidujte podle informací na obalu a poznačte si datum expirace.

## Signalizace slabé baterie

Když je baterie vybitá, ozve se zvukový signál. Pokud však dojde k náhlému vybití baterie, nemusí upozornění zaznít. Doporučujeme při sobě nosit vždy náhradní baterii.

## Výměna baterie

Při výměně baterií postupujte následovně:



Sejměte z nové baterie lepicí štítek a ujistěte se, že na ní nezůstal zbytek lepidla. Nechejte ji po dobu 60 sekund „dýchat“.  
Pomocí výstupku pro nehet jemně otevřete dvířka baterie a vyjměte starou baterii.

Nyní podle obrázku vložte do přihrádky novou baterii. Zavřete dvířka. Pokud je nelze snadno zavřít, není baterie umístěna správně. Pokud sluchadlo několik dnů nepoužíváte, baterii vyjměte.

#### **POZNÁMKA**

Dávejte pozor, abyste sluchadlo neupustili na zem – vždy jej při výměně baterie držte nad měkkým povrchem.



# PŘIZPŮSOBENÍ

## Programy

Toto je přehled programů, ze kterých můžete vybírat. Poradte se se sluchadlovým odborníkem.

<b>PROGRAMY</b>	<b>POUŽITÍ</b>
Univerzální	Pro každodenní použití
Ticho	Speciální program pro poslouchání v tichých prostředích
Komfort	Speciální program pro poslech v tichém prostředí
Automobil	Pro poslech v prostředí, kde je hlučná doprava – auta, vlaky apod.
Řeč v hluku	Použijte tento program, pokud preferujete jasný a ostrý zvuk
Město	Pro poslech v prostředích s měnící se hladinou hlasitosti (v supermarketech, hlučném pracovním prostředí apod.)
Restaurace	Pro poslech v situacích, kdy mnoho osob mluví současně

**PROGRAMY****POUŽITÍ**

Společnost

Použijte tento program, pokud jste na malých společenských setkáních, jako jsou např. rodinné večere

Hudba

Pro poslech hudby

**SPECIÁLNÍ PROGRAMY****POUŽITÍ**

Zen

Přehrává tóny nebo ruch jako relaxační zvuk na pozadí

Telefon

Tento program je vytvořen k poslechu telefonních hovorů

**PROGRAMY SMARTTOGG-  
LE****POUŽITÍ**

Zen+

Tento program je podobný jako Zen, ale umožňuje poslouchat různé typy tónů nebo ruchu

**POZNÁMKA**

Názvy v seznamu programů jsou výchozími názvy. Sluchadlový odborník může rovněž vybrat alternativní název programu z předvybraného seznamu. Díky tomu se vám bude snáze vybírat vhodný program pro danou situaci.

Podle míry vaší ztráty sluchu může sluchadlový odborník aktivovat funkci rozšířené slyšitelnosti. Zeptejte se svého odborníka na sluch, zda by to pro vás mohlo být přínosné.

Pokud se vaše potřeby a preference v průběhu času změní, může sluchadlový odborník jednoduše změnit vaši nabídku programů.

## **Program Zen**

Vaše sluchadlo může být vybaveno jedinečným volitelným poslechovým programem, který se nazývá Zen. Vytváří melodie (a někdy šum) na pozadí.



Budete-li mít pocit, že se snížila hlasitost nebo se zhoršila tolerance zvuků, řeč není dost jasná nebo se zhoršil ušní šelest (tinnitus), obraťte se na svého lékaře.



Program Zen může bránit ve slyšení každodenních zvuků včetně řeči. Neměli byste jej používat, když potřebujete takové zvuky slyšet. V těchto situacích přepněte sluchadlo na jiný program než Zen.

## **Změna programů**

Změnu programu a nastavení zvuku u svých sluchadel můžete provádět pomocí aplikace ToneLink.

## **Zvukové signály**


Vaše sluchadlo vydává zvukové signály, aby vás informovalo o aktivování určitých funkcí nebo o tom, že jste změnili program. Těmito zvuky mohou být mluvené zprávy nebo tóny.

Pokud tyto zvukové signály nepotřebujete, požádejte svého sluchadlového odborníka o jejich vypnutí.

# ČIŠTĚNÍ

## Nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:

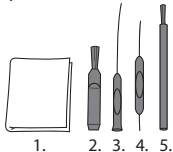

1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie

## Jak čistit sluchadlo

Budete-li sluchadlo čistit každý den, bude lépe fungovat a také jeho nošení bude příjemnější.

### Sluchadlo



Otírejte jej pouze měkkým hadříkem (např. hadříkem, který jste dostali od sluchadlového odborníka).

## Zvukový výstup




Odstraňte veškerý viditelný ušní maz z **okolí** zvukového výstupu pomocí malé kartáčku nebo hadříku.

**Nikdy** se nepokoušejte čistit ochranu před ušním mazem (filtr).

### POZNÁMKA

Pokud se vám nedaří zvukový výstup vyčistit, obraťte se na sluchadlového odborníka. **Nikdy** nic nezavádějte do výstupu zvuku, mohlo by dojít k poškození sluchadla.

## Mikrofonní vstupy

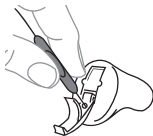


Otevřete kryt baterie a otočte sluchadlo tak, aby kryt směřoval dolů (viz obrázek). Zevnitř zaveďte krátký nástroj pro odstraňování mazu (č. 4) skrz mikrofonní vstupy v krytu (viz obrázek).

### POZNÁMKA

Pokud máte podezření, že se ušní maz nebo nečistota dostaly dovnitř mikrofonu ve sluchadle, obraťte se na servis. Do mikrofonu nikdy nic **nezavádějte**.

## Ventilační kanálek

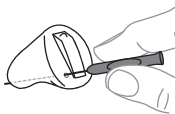

Krátký ventilační kanálek: Vyčistěte ventilační kanálek tak hluboko, kam až dosáhne dlouhý konec nástroje pro odstraňování mazu (č. 4).  
Dlouhý ventilační kanálek: Čistěte ventilační kanálek každý den protahováním dlouhého nástroje pro odstraňování mazu (č. 3) skrz celou jeho délku.

Až budete hotovi, nechte sluchadlo otevřené, aby mohlo větrat.

## POZNÁMKA

Aby mohlo sluchadlo dobře fungovat, je důležité udržovat ventilační kanálek čistý a bez ušního mazu a nečistot. Každý den jej po použití vyčistěte, a pokud je ventilační otvor ucpaný, obraťte se na sluchadlového odborníka.

Pokud sluchadlo zvlhne nebo se hodně zpotíte, rychle ho vysušte. Doporučujeme používat speciální vysušovací pouzdra (např. Widex PerfectDry Lux), která pomáhají udržet sluchadla suchá a čistá a prodlužují jejich životnost. Zeptejte se sluchadlového odborníka, zda je pro vás toto zařízení vhodné.



K čištění sluchadla nepoužívejte žádnou tekutinu ani dezinfekci.



Každý den sluchadlo po použití očistěte a zkontrolujte, zda je v pořádku. Pokud se sluchadlo během nošení rozbije a ve zvukovodu vám zůstanou malé úlomky, obraťte se na svého lékaře. Nikdy se nepokoušejte tyto úlomky vyjmout sami.


## Ochrana před ušním mazem (filtr)

Ochrana před ušním mazem pomáhá chránit sluchadlo před ušním mazem. Používejte ochranu přes ušním mazem dodávanou společností Widex.

### Výměna ochrany před ušním mazem




Otevřete přihrádku ochrany před ušním mazem, jak je uvedeno na obrázku.

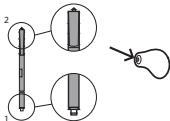


Ochrana před ušním mazem tvoří následující součásti:


1. Odstraňovací háček
2. Nová ochrana před ušním mazem

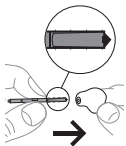



Zavedte odstraňovací háček do použité ochrany před ušním mazem.

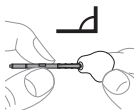

Držte násadku v pravém úhlu.

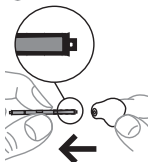


Vytáhněte použitou ochranu před ušním mazem rovně ven.

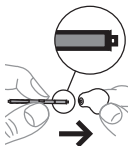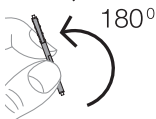

Zavedte novou ochranu před ušním mazem do otvoru výstupu zvuku a opatrně ji zatlačte.



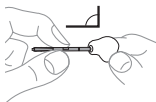

Násadku rovně vytáhněte.



Zeptejte se odborníka na sluch, jak často byste měli ochranu před ušním mazem měnit.



Ochrana před ušním mazem je pouze na jedno použití a není určena k čištění.



Pokud je ochrana před ušním mazem uvolněná, zlikvidujte ji a použijte novou.



Pokud ochrana před ušním mazem zapadne do vašeho ucha, obraťte se na svého lékaře nebo odborníka na sluch, aby vám ji vyjmul. **NESNAŽTE SE** ochranu před ušním mazem vyjmout sami.

## ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Tyto stránky obsahují rady, jak řešit situace, když sluchadlo přestane fungovat nebo nefunguje dle očekávání. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
Sluchadlo nereaguje.	Není zapnuté.	Ujistěte se, že je baterie umístěna správně a kryt je správně uzavřen.
	Baterie nefunguje	Vložte do sluchadla novou baterii
	Výstup zvuku je ucpaný	Přečtěte si část o čištění
Sluchadlo není dostatečně hlasité	Mikrofonní vstup je ucpaný	Přečtěte si část o čištění
	Výstup zvuku je ucpaný	Přečtěte si část o čištění
	Ucho je ucpané ušním mazem	Obraťte se na svého lékaře.
	Mohlo dojít ke změně sluchu.	Obraťte se na odborníka na sluch / svého lékaře.

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
Ze sluchadla se ozývá nepřetržité pískání.	Ucho je ucpané ušním mazem.	Obrat'te se na svého lékaře
	Sluchadlo není správně umístěno ve zvukovodu	Vyjměte jej a znovu vložte
	Sluchadlo je ve zvukovodu uvolněné	Obrat'te se na odborníka na sluch
Nošení sluchadla je nepohodlné	Není správně umístěno ve zvukovodu	Obrat'te se na odborníka na sluch
	Sluchadlo nezapadá správně do ucha	Obrat'te se na odborníka na sluch
	Ucho nebo zvukovod bolí	Je důležité, aby začínající uživatelé nosili sluchadlo ze začátku pouze po krátkou dobu. Na nošení sluchadla si postupně 2–3 týdny zvykejte. Pokud bolestivost přetrvává, obra'tte se na odborníka

# INFORMACE O PŘEDPÍSECH

## Prohlášení k nařízením FCC a ISED

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**NOTE:**

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Windex A/S could void the user's authority to operate the equipment.

**ISED Statement / Déclaration d'ISED**

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



N26346

## **Informace týkající se likvidace**

Sluchadla, jejich příslušenství a baterie se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu.

Sluchadla, baterie a příslušenství sluchadel je nutné odevzdat na místo určené k likvidaci elektrických a elektronických zařízení nebo vrátit odborníkovi na sluchadla za účelem bezpečné likvidace.

# SYMBOLY

Symbole používané Widex A/S při označování zdravotnických prostředků (štítky, návody k použití apod.)

## Symbol    Název/Popis

---



### Výrobce

Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum výroby.

---



### Katalogové číslo

Katalogové číslo (číslo položky) produktu.

---



### Přečtěte si návod k použití

Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování / bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.

---



### Varování

Text označený symbolem varování je nutné před použitím produktu prostudovat.

---



### Značka WEEE

„Nevyhadzovat do komunálního odpadu“. Je-li výrobek nutné zlikvidovat, musí být odeslán na určené sběrné místo k recyklaci a obnově, aby se zabránilo riziku znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek.

---



### Značka CE

Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnících, které se týkají označení CE.

---

**Symbol** **Název/Popis**

---



**Značka RCM**

Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektrické bezpečnosti, elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh.

---









**Widex PRAHA**

Bohušovická 230/12

190 00 Praha 9

Tel: 286 580 396

servis@widex.cz

**Widex BRNO**

Hlinky 995/70

603 00 Brno

Tel: 543 331 630

brno@widex.cz

www.widex.cz

**Widex OSTRAVA**

Biskupská 3330/8

702 00 Ostrava

Tel: 597 317 597

ostrava@widex.cz

**Widex A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Dánsko

<https://global.widex.com>

0123

**Návod č.:**

9 514 0578 020 01

**Vydáno:**

2021-02

