

# WIDEX **MOMENT**<sup>™</sup>

## BRUKSANVISNING **WIDEX MOMENT<sup>™</sup>-SERIEN**

MBB3D-modell  
BTE  
(Bakom-örat)



**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING

# DIN HÖRAPPARAT

*(Fylls i av din audionom)*

Detta är en lista över möjliga program för din hörapparat. Mer information om hur du använder dessa program finns under Anpassning.

## Dina hörapparatprogram:

<b>PROGRAM</b>	<b>AUDIBILITY EXTENDER</b>
<input type="checkbox"/> Universal	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PureSound	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tyst miljö	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Komfort	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Transport	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> City	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Talfokus	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Party	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sällskap	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Musik	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> M+T	<input type="checkbox"/>

**SPECIALPROGRAM** Zen Telefon**AUDIBILITY EXTENDER****SMARTTOGGLE-PROGRAM** Zen+**OBSERVERA**

Beskrivningen och användningen av telefonprogrammet i den här bruksanvisningen gäller endast vanliga telefonsamtal, inte telefonsamtal via direktstreaming från din smartphone.

**Programnamn**

Programnamnen i tabellen är standardnamnen. Om du har valt att använda några av de andra tillgängliga namnen, ska du ange de nya namnen i tabellen. På så sätt vet du alltid vilka program du har i din hörapparat.

**Läs instruktionerna**

Läs noga igenom bruksanvisningen i denna broschyr och i häftet "Öroninsatser för Widex hörapparater" innan du börjar använda din hörapparat.

**Ljudstreaming och trådlös kontroll**

Den här hörapparaten fungerar med trådlös direktanslutning och direkt ljudstreaming från smartphones och andra enheter via DEX. För mer information och hjälp, kontakta din audionom eller besök: <https://global.widex.com>

Denna hörapparat kan användas trådlöst med MOMENT-appen. Vi tar inget ansvar om hörapparaten används med en tredjepartsapp eller om appen används med en annan enhet. Läs mer om appen i häftet.

# INNEHÅLLFÖRTECKNING

<b>VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION.....</b>	<b>7</b>
<b>DIN HÖRAPPARAT.....</b>	<b>9</b>
Välkommen.....	9
En översikt över hörapparaten.....	10
<b>ANVÄNDARVILLKOR.....</b>	<b>12</b>
Indikationer för användning.....	12
Avsedd användning.....	12
Hantering, förvaring och transport.....	12
Driftförhållanden.....	12
Förvaring och transport.....	13
<b>DAGLIG ANVÄNDNING.....</b>	<b>14</b>
Slå på och stänga av hörapparaten.....	14
Sätta i och ta ut hörapparaten.....	14
Så här skiljer du på höger och vänster.....	15
<b>BATTERIET.....</b>	<b>16</b>
Indikation om låg batteriladdning.....	16
Byta batteriet.....	16
Manipuleringskyddat batterifack.....	18
<b>ANPASSNING.....</b>	<b>19</b>
Program.....	19

Zen-programmet.....	21
Justera program.....	21
Ljudsignaler.....	22
Bruten IE-kommunikation .....	22
Ljudjustering.....	22
Använd en smartphone med din hörapparat.....	23
<b>PARKOPPLA DIN HÖRAPPARAT TILL EN SMARTPHONE.....</b>	<b>24</b>
KOMPABILITET MED SMARTPHONES.....	24
<b>RENGÖRING.....</b>	<b>25</b>
Verktyg.....	25
Rengöring.....	25
<b>TILLBEHÖR.....</b>	<b>27</b>
<b>FELSÖKNING.....</b>	<b>28</b>
<b>INFORMATION OM GÄLLANDE REGELVERK.....</b>	<b>30</b>
EU-direktiv.....	30
Direktiv 2014/53/EU.....	30
Information om kassering.....	30
FCC och ISED-förklaringar.....	31
<b>SYMBOLER.....</b>	<b>34</b>

## VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa sidor noga innan du börjar använda hörapparaten.



**Hörapparater och batterier kan vara farliga om de sväljs eller används på fel sätt. Att svälja eller använda dessa på fel sätt kan leda till allvarliga skador och även innebära livsfara. Vid förtäring, ring 112 eller ett sjukhus omedelbart.**



Ta ut hörapparaterna när du inte använder dem. Det gör att hörselgången kan ventileras och förebygger öroninfektioner.



Kontakta omedelbart din läkare eller audionom om du tror att du har en öroninfektion eller tror att du har fått en allergisk reaktion.



Kontakta din audionom om hörapparaten inte känns bekväm eller inte sitter rätt, eller om den orsakar irritation, rodnad eller liknande.



Ta ut hörapparaterna innan du duschar, simmar eller använder en hårtork.



Använd inte hörapparaterna när du applicerar parfym, spray, gel, lotion eller kräm.



Torka inte hörapparaten i en mikrougn, eftersom den då förstörs.



Använd aldrig andra personers hörapparater och låt aldrig andra personer använda dina eftersom det kan skada din hörsel.



Använd aldrig hörapparaterna i miljöer där det kan finnas explosiva gaser, som i gruvor eller liknande.



**Förvara hörapparaterna, dess delar, tillbehör och batterier oåtkomliga för barn och personer med psykisk funktionsnedsättning.**



Försök aldrig att själv öppna eller reparera hörapparaten. Kontakta din audionom om hörapparaten behöver repareras.



Hörapparaterna innehåller teknik baserad på radiokommunikation. Tänk på var du använder dem. Om det finns eventuella restriktioner måste du vidta åtgärder för att efterleva dessa.



Enheten har utformats för att uppfylla internationella standarder för elektromagnetisk kompatibilitet. Det kan dock orsaka interferens med annan elektronisk utrustning. Om du upplever interferens, håll avstånd till annan elektrisk utrustning.



**Observera att du kanske inte hör andra viktiga ljud, såsom larm och trafikljud, om du streamar ljud till dina hörapparater på hög volym. I sådana situationer rekommenderar vi att du håller volymen på strömmande ljud på lämplig nivå.**



Hörapparaten är mycket kraftfull och kan spela upp ljud som överskrider 132 dB. Det kan därför finnas risk för att det som återstår av din hörsel skadas.



Utsätt inte hörapparaterna för extrema temperaturer eller hög fuktighet, och torka snabbt av dem om de blir våta eller om du svettas mycket.



Det finns risk för explosion om du byter ut batteriet mot en felaktig typ.



# DIN HÖRAPPARAT

## Välkommen

Gratulerar till din nya hörapparat.


Använd din hörapparat regelbundet, även om det tar tid att vänja sig vid den. Personer som inte använder hörapparaten så ofta får inte fullt utbyte av den.

### **OBSERVERA**


Din hörapparat och dess tillbehör kanske inte ser ut exakt som i denna broschyr. Vi förbehåller oss också rätten att göra de ändringar som vi anser vara nödvändiga.

## En översikt över hörapparaten

Illustrationen visar hörapparaten utan öroninsatsen. Mer information om öroninsatsen hittar du i bruksanvisningen för öroninsatsen. Öroninsatsen består av en slang och en ear-tip eller earmould, och det är den del av hörapparaten som du använder inuti örat.

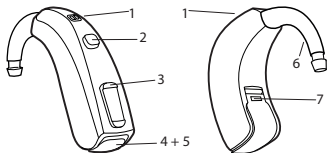

1. Mikrofonöppningar
2. Programknapp
3. Volymkontroll
4. Batterilucka med nagelgrepp
5. På/av-knapp
6. Slangfäste
7. Identifiera höger/vänster sida. Hörapparaten för vänster öra har en blå märke. Hörapparaten för höger öra har en röd märke.

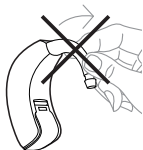

**OBSERVERA**

Observera att slangfästet sitter fast på hörapparaten och ska inte tas bort.

# ANVÄNDARVILLKOR

## Indikationer för användning

Hörapparaterna är avsedda för personer med hörselnedsättning av varierende svårighetsgrad, från minimal (10 dB hörselnedsättning) till svår/grav (105 dB hörselnedsättning), och alla typer av hörselnedsättningar.

De ska programmeras av en licensierad hörselspecialist (audionom, hörselspecialist, otorinolaryngolog) som är utbildad i hörsel(re)habilitering.

För individer under 36 månader gäller följande begränsningar:

- En standardkrok och en anpassad koppling måste användas.
- Manipuleringskyddat batterifack måste användas.

## Avsedd användning

Hörapparaterna är avsedda för ljudförstärkning i vardagssituationer. Hörapparaterna kan förses med Zen-programmet, som är avsett att ge en avkopplande ljudbakgrund (dvs. musik/bruskälla) för vuxna som vill lyssna på en sådan bakgrund i tystnad.

## Hantering, förvaring och transport

### Driftförhållanden

Din hörapparat har utformats för att fungera i vardagssituationer och den fungerar i de miljöer som du vistas i. Du kan använda hörapparaten på flygningar, men du bör ta av den innan du duschar eller badar.

De särskilda funktionsförhållandena för din hörapparat finns i listan nedan:

	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>
Temperatur	0° C (32° F)	50° C (122° F)
Luftfuktighet	10 % RH	95 % RH
Lufttryck	750 mbar	1060 mbar

### **Förvaring och transport**


Din hörapparat är känslig för extrema förhållanden som till exempel höga temperaturer. Se Förvaring och transport nedan:

	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>
Temperatur	-20° C (-4° F)	55° C (131° F)
Luftfuktighet	10 % RH	95 % RH

Du kan hitta tekniska datablad och mer information om hörapparaterna på <https://global.widex.com>.

## DAGLIG ANVÄNDNING

### Slå på och stänga av hörapparaten

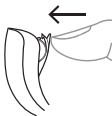

Stäng batteriluckan för att sätta på hörapparaten. Hörapparaten spelar en ljudsignal för att indikera att den är påslagen, under förutsättning att din audionom inte har inaktiverat den här funktionen.



Skjut ned batteriluckan för att stänga av hörapparaten.

### OBSERVERA

Glöm inte stänga av hörapparaten när den inte används.

### Sätta i och ta ut hörapparaten


#### Ta på hörapparaten



1. Placera öroninsatsen i örat genom att hålla i den nedre delen av slangen/earwire. Det kan underlätta om du samtidigt drar ytterörat uppåt och bakåt.
2. Fäst sedan hörapparaten bakom örat. Hörapparaten ska vila bekvämt på örat, tätt intill huvudet.

Hörapparaten kan anpassas med olika typer av öroninsatser. I den separata bruksanvisningen för öroninsatsen hittar du mer information om öroninsatsen.

### **Ta bort hörapparaten**

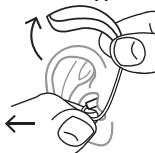

Börja med att ta bort hörapparaten från dess plats bakom örat.  
Dra sedan försiktigt ut öroninsatsen ur hörselgång-  
en genom att hålla i den nedre delen av slangen/  
earwire.

### **Så här skiljer du på höger och vänster**

Hörapparaten till höger öra har en röd markering. Hörapparaten till vänster öra har en blå markering.

## BATTERIET

Använd ett **zink-luftbatteri av 13-modell** i hörapparaten.

Använd alltid ett nytt batteri av just det slag som din audionom rekommenderar.

### OBSERVERA

Kontrollera att batteriet är helt rent och fritt från smuts innan du sätter in det i hörapparaten. I annat fall kan det hända att hörapparaten inte fungerar som väntat.



Försök aldrig ladda batterierna till hörapparaten eftersom de kan explodera.



Lämna aldrig ett tomt batteri i hörapparaten när du lägger undan den för förvaring. Det kan börja läcka och förstöra hörapparaten.



Följ anvisningarna på förpackningen om avfallshantering av förbrukade batterier och beakta utgångsdatumet.

### Indikation om låg batteriladdning

När batteriet är tomt ljuder en signal. Om batteriet laddas ur snabbt kan det dock hända att det inte kommer något varningsljud. Vi rekommenderar att du alltid har med dig ett reservbatteri.

### Byta batteriet

Gör så här för att byta batteriet:





Ta bort klisterlappen från det nya batteriet och se till att det inte finns några limrester kvar på det. Låt det "andas" i 60 sekunder.



Använd nagelgreppet för att försiktigt öppna batteriluckan och ta ur det gamla batteriet.



Sätt nu i det nya batteriet i batterifacket så som visas på bilden. Stäng facket. Om det är svårt att stänga sitter inte batteriet korrekt.

Ta ur batteriet om du inte ska använda hörapparaten på några dagar.

#### **OBSERVERA**

Var försiktig så du inte tappar hörapparaten. Håll hörapparaten över ett mjukt underlag när du byter batteriet.

## Manipuleringskyddat batterifack

Om hörapparaten ska användas av ett barn eller en person med en fysisk funktionsnedsättning kan du be din audionom att sätta på ett manipuleringskyddat batterifack på hörapparaten.



Använd det specialverktyg som medföljde hörapparaten och följ anvisningarna för att öppna batterifacket.

# ANPASSNING

## Program

Det här är en översikt över program som du kan välja mellan. Fråga din auditionom för mer information.

<b>PROGRAM</b>	<b>ANVÄNDNING</b>
Universal	Automatiskt program med fokus på optimalt ljud i alla situationer
PureSound	Automatiskt program med fokus på naturligt och behagligt ljud i alla situationer
Tyst miljö	Specialprogram för lyssnande i tysta miljöer
Komfort	Specialprogram för lyssnande i bullriga miljöer
Transport	När du ska lyssna i situationer med buller från bilar, tåg och liknande
Talfokus	Använd detta program om du föredrar ett tydligare och skarpare ljud
City	När du ska lyssna i situationer med varierande ljudnivåer (i affärer, på bullriga arbetsplatser och liknande)
Party	När du ska lyssna i situationer där många människor pratar samtidigt

<b>PROGRAM</b>	<b>ANVÄNDNING</b>
Sällskap	Använd det här programmet om du är på mindre, sociala tillställningar, såsom familjemiddagar
Musik	När du ska lyssna på musik
T	Med det här programmet lyssnar du via hörapparatens telespole, vilket gör att du kan höra ljudet direkt utan bakgrundsbrus (kräver en teleslinga)
M+T	Det här programmet är en kombination av hörapparatens mikrofon och telespolen. Du kan höra ljudkällan, men du kan även höra andra ljud
<b>SPECIALPROGRAM</b>	<b>ANVÄNDNING</b>
Zen	Spelar upp toner eller brus i bakgrunden som avkoppling
Telefon	Program utformat för att lyssna på telefonsamtal
<b>SMARTTOGGLE-PROGRAM</b>	<b>ANVÄNDNING</b>
Zen+	Detta program påminner om Zen, men innehåller olika typer av toner eller brus

Namnen i listan över program är standardnamnen. Din audionom kan också välja ett annat programnamn från en förvald lista. Det gör det ännu lättare att välja rätt program vid varje lyssningsituation.

Beroende på din hörselnedsättning kan din audionom aktivera Audibility Extender-funktionen. Fråga din audionom om detta kan hjälpa dig.

Om dina behov och vad du föredrar ändras med tiden kan din audionom enkelt ändra ditt programval.

## Zen-programmet

Din hörapparat kan förses med ett unikt lyssningsprogram (tillval) som kallas Zen. Det genererar musiktöner (och ibland ett brusande ljud) i bakgrunden.



Kontakta din audionom om du upplever minskad ljudstyrka, minskad ljudtolerans, otydligt tal eller förvärrad tinnitus.



När du använder Zenprogrammet kan det hindra dig från att höra vardagliga ljud, inklusive tal. Det bör inte användas om det är viktigt att höra sådana ljud. Byt till ett icke-Zen-program i dessa situationer.

## Justera program

Om du vill byta program trycker du bara på programknappen. Tryck och håll in tryckknappen i mer än en sekund för att öppna och avsluta SmartToggle-programmet (den här inställningen är valfri). Tryck lätt på knappen för att bläddra bland de olika Zen-stilarna när du har öppnat SmartToggle-programmet.

## Ljudsignaler

Din hörapparat spelar upp ljud för att informera dig om att vissa funktioner har aktiverats eller att du har bytt program. Dessa ljud kan vara talade meddelanden eller toner.

Be din audionom att stänga av dessa ljud om du inte behöver dem.

### **Bruten IE-kommunikation**

(endast på utvalda modeller)

Din audionom kan aktivera en funktion i hörapparaten som varnar dig när den förlorar kontakten med hörapparaten i det andra örat. Du kommer att höra ett talat meddelande i ditt öra.

## Ljudjustering

Din hörapparat justerar ljudet automatiskt efter den ljudmiljö du befinner dig i.

Du kan också justera volymen manuellt för att få ökad komfort eller höra bättre, beroende på dina behov och vad du föredrar. Kontakta din audionom för mer information om hur detta fungerar.

Beroende på hörapparatens inställningar och funktion kan de ljudjusteringar du gör påverka båda hörapparaterna.

Varje gång du använder volymkontrollen hörs en ton, under förutsättning att din audionom inte har inaktiverat den här funktionen. En ihållande ton hörs när den högsta eller lägsta justeringsnivån har uppnåtts.

**Gör så här för att stänga av ljudet i hörapparaten:**

- Tryck ner den lägre delen av volymkontrollen tills du hör den ihållande tonen

### **Gör så här för att slå på ljudet igen:**

- Tryck på den övre delen av volymreglaget **eller**.
- Byt program

All justering av volyminställningen avbryts när hörapparaten stängs av eller när du byter program.

### **OBSERVERA**

Du kan även använda din app för att byta program och justera ljudet i hörapparaterna.

### **Använd en smartphone med din hörapparat**



När du använder en smartphone håller du den framför dig så att mikrofonen på telefonen är nära munnen. På så sätt får du det bästa ljudet under telefonsamtalet.

## **PARKOPPLA DIN HÖRAPPARAT TILL EN SMARTPHONE**

Om du vill koppla din hörapparat till en smartphone måste du starta om din hörapparat. Gör så här:

1. Starta om din hörapparat genom att öppna och stänga batterifacket.
2. Håll hörapparaten nära telefonen och följ anvisningarna på telefonen.
3. Din hörapparat och smartphone är nu klara att användas.

### **OBSERVERA**

Din hörapparat är bara i parkopplingsläget i tre minuter efter att du har startat om den. Du kan behöva starta om den igen om du inte hinner parkoppla dem i tid.

## **KOMPABILITET MED SMARTPHONES**

En lista med kompatibla smartphone-modeller, surfplattor osv. finns på denna webbplats:


<https://global.widex.com>.



# RENGÖRING

## Verktyg

Följande rengöringsverktyg medföljer hörapparaten:

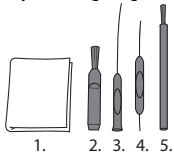

1. Duk
2. Borste
3. Långt verktyg för vaxborttagning
4. Kort verktyg för vaxborttagning
5. Batterimagnet

## Rengöring

Om du rengör hörapparaten varje dag blir den mer effektiv och behagligare att ha på sig.



Torka bara av hörapparaten med en mjuk duk (till exempel den du fick av din audionom).

Om mikrofonöppningarna är blockerade kontakter du din audionom.

Torka hörapparaten snabbt om den blir våt eller om du svettas mycket. En del använder en särskild avfuktare som Widex PerfectDry Lux för att hålla sina hörapparater torra och rena. Fråga din audionom om detta kan hjälpa dig.

Låt batterifacket vara öppet för att lufta hörapparaten när du inte använder den. Information om hur du rengör öroninsatsen hittar du i bruksanvisningen för öroninsatsen.



Använd inte någon form av vätska eller desinfektionsmedel när du rengör hörapparaten.



Rengör och inspektera din hörapparat varje dag efter användningen för att kontrollera att den är intakt. Om hörapparaten går sönder när den sitter i hörselgången och det hamnar små delar i hörselgången ska du kontakta din läkare. Försök aldrig ta ut delarna själv.

## TILLBEHÖR

Du kan använda många olika tillbehör till din hörapparat. Fråga din audionom för att ta reda på om detta kan hjälpa dig.

<b>Namn</b>	<b>Användning</b>
RC-DEX	fjärrkontroll
TV-DEX	för att lyssna på tv och musik
PHONE-DEX 2*	för enkel användning av fast telefoni
FM+DEX	för streaming av ljud och FM-signaler
T-DEX	för anslutning av hörapparater till mobiltelefoner via en telespole
COM-DEX	för trådlös anslutning till mobiltelefoner och andra enheter via Bluetooth
COM-DEX Remote Mic	för att hjälpa hörapparat-användare att höra tal i krävande lyssningssituationer
TV PLAY	för direkt tv-streaming
MOMENT	för att kontrollera dina hörapparater från en smarttelefon

\*Finns endast i vissa länder.

## FELSÖKNING

Dessa sidor innehåller råd om vad du ska göra om din hörapparat slutar att fungera eller fungerar otillfredsställande. Om problemet kvarstår kontaktar du din audionom.

<b>Problem</b>	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Lösning</b>
Hörapparaten är helt tyst	Den är inte påslagen	Kontrollera att batterifacket är helt stängt
	Batteriet fungerar inte	Sätt i ett nytt batteri
Volymen i hörapparaten är inte tillräckligt stark	Ditt öra blockeras av öronvax	Kontakta din läkare
	Din hörsel kan ha ändrats	Kontakta din audionom eller läkare
Hörapparaten tjuver oavbrutet	Ditt öra blockeras av öronvax	Kontakta din läkare
De två hörapparaterna arbetar inte synkront	Anslutningen mellan hörapparaterna har avbrutits	Stäng av dem och slå på dem igen

<b>Problem</b>	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Lösning</b>
Hörapparaterna svarar inte på volymjusteringar eller programbyten som görs på kontrollenheten	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Enheten används utanför sändningsområdet</li> <li>b. Kraftig elektromagnetisk störning i närheten</li> <li>c. Enheten och hörapparaterna är inte ihopkopplade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Flytta enheten närmare hörapparaterna</li> <li>b. Flytta dig längre bort från den kända EM-störningskällan</li> <li>c. Be din audionom kontrollera att enheten är ihopkopplad med hörapparaterna</li> </ul>
Du hör "avbrutet" tal (på och av) från hörapparaterna eller inget tal (avstängt) från den sändande hörapparaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Batteriet i en av hörapparaterna är förbrukat</li> <li>b. Kraftig elektromagnetisk störning i närheten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Byt batteri i den ena eller båda hörapparaterna</li> <li>b. Flytta dig längre bort från kända störningskällor</li> </ul>

### **OBSERVERA**

Denna information omfattar endast hörapparaten. Se bruksanvisningen för "Öroninsatser för Widex hörapparater" för specifik information om din öroninsats. Om problemen kvarstår kontaktar du din audionom för hjälp.

# INFORMATION OM GÄLLANDE REGELVERK

## EU-direktiv

### Direktiv 2014/53/EU

Härmed intygar WSAUD A/S att MBB3D överensstämmer med väsentliga krav och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. MBB3D innehåller radiosändare som arbetar på: 10,6 MHz, -54 dB $\mu$ A/m vid 10 m, 2,4 GHz, 0,9 mW EIRP.

En kopia av försäkran om överensstämmelse i enlighet med direktiv 2014/53/EU finns på:

<https://global.widex.com/doc>

För att undvika potentiell försämring av radioprestanda bör enheten separeras med minst 25 cm (10 tum) från annan radiokommunikationsutrustning.



N26346

### Information om kassering

Släng inte hörapparater, hörapparattillbehör och batterier tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.

Hörapparater, batterier och hörapparattillbehör ska slängas på avfallsstationer som är avsedda för elektriskt och elektroniskt avfall, eller lämnas till din audionom för säker avfallshantering.

## **FCC och ISED-förklaringar**

FCC ID: 2AXDT-MBB3D

IC: 26428-MBB3D

### **Federal Communications Commission Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**NOTE:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by WSAUD A/S could void the user's authority to operate the equipment.

**ISED Statement / Déclaration d'ISED**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



#### ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

# SYMBOLER

Symboler som ofta används av WSAUD A/S i märkning av medicintekniska produkter (etiketter, bruksanvisningar osv.)

## Symbol Rubrik/beskrivning

---



### Tillverkare

Produkten tillverkas av den tillverkare vars namn och adress anges intill symbolen. Om tillämpligt anges även tillverkningsdatumet.

---



### Katalognummer

Produktens katalognummer (artikelnummer).

---



### Se bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller viktig säkerhetsinformation (varningar/försiktighetsåtgärder) och måste läsas innan produkten används.

---



### Varning

Text som har markerats med en varningssymbol måste läsas innan produkten används.

---



### WEEE-märkning

”Får inte kastas i vanligt avfall” När produkten ska kasseras måste den lämnas till avsedd samlingsstation för återvinning och återanvändning för att undvika risk för skador på miljön eller människors hälsa som en följd av de farliga ämnen som den innehåller.

---



### CE-märkning

Produkten överensstämmer med de krav som anges i de europeiska direktiven för CE-märkning.

---

<b>Symbol</b>	<b>Rubrik/beskrivning</b>
---------------	---------------------------

---



	<b>RCM-märkning</b>
--	---------------------

	Produkten uppfyller elsäkerhetskrav, EMC-direktivets krav och radiospektrumreglerande krav för produkter som levereras till Australien eller Nya Zeeland.
--	---

---



**WSAUD A/S**

Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngby, Danmark  
<https://global.widex.com>



**Handbok nr:**  
9 514 0576 012 01  
**Utgåva:**  
2021-02

