



6月6日は補聴器の日



WINDMADE™

ワイデックスを選ぶこと。

それは、「WindMade」認定企業の製品を選ぶということ。

「WindMade」とは風力による発電を採用する企業に与えられる世界で初めての消費者向けマークです。

- 補聴器の装用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察を受けることをお勧めします。
- 補聴器は個々の難聴や聞こえの程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要で、適切なフィッティングによってその効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

ワイデックス株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2
浜松町262ビル6F

一般のお客様専用お問い合わせフリーダイヤル

TEL ☎0120-332-604

FAX ☎0120-332-394

ワイデックス サービスセンター

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1

三機大和ビルB館5階

補聴器店様用 フリーコール：00777-81810

FAX：00777-81811

製造販売元 ワイデックス株式会社
許可番号 13B2X00020 管理医療機器

ホームページ

<https://www.widex.com/ja-jp/>



ワイデックス補聴器のご相談、ご用命は当店へ。お気軽にご来店ください。

※カタログに掲載されている価格はメーカー希望小売価格です。

※補聴器は薬機法で定められた医療機器のため、消費税のかからない非課税対象商品です。

ただし、アクセサリ・周辺機器は課税対象です。

※製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。


※カタログに掲載されている製品の色は、印刷により実際と多少異なる場合があります。

※このカタログの内容は2022年10月現在のものです。

202210 130000
Printed by AD-BIC



ワイデックス補聴器カタログ 2022.10

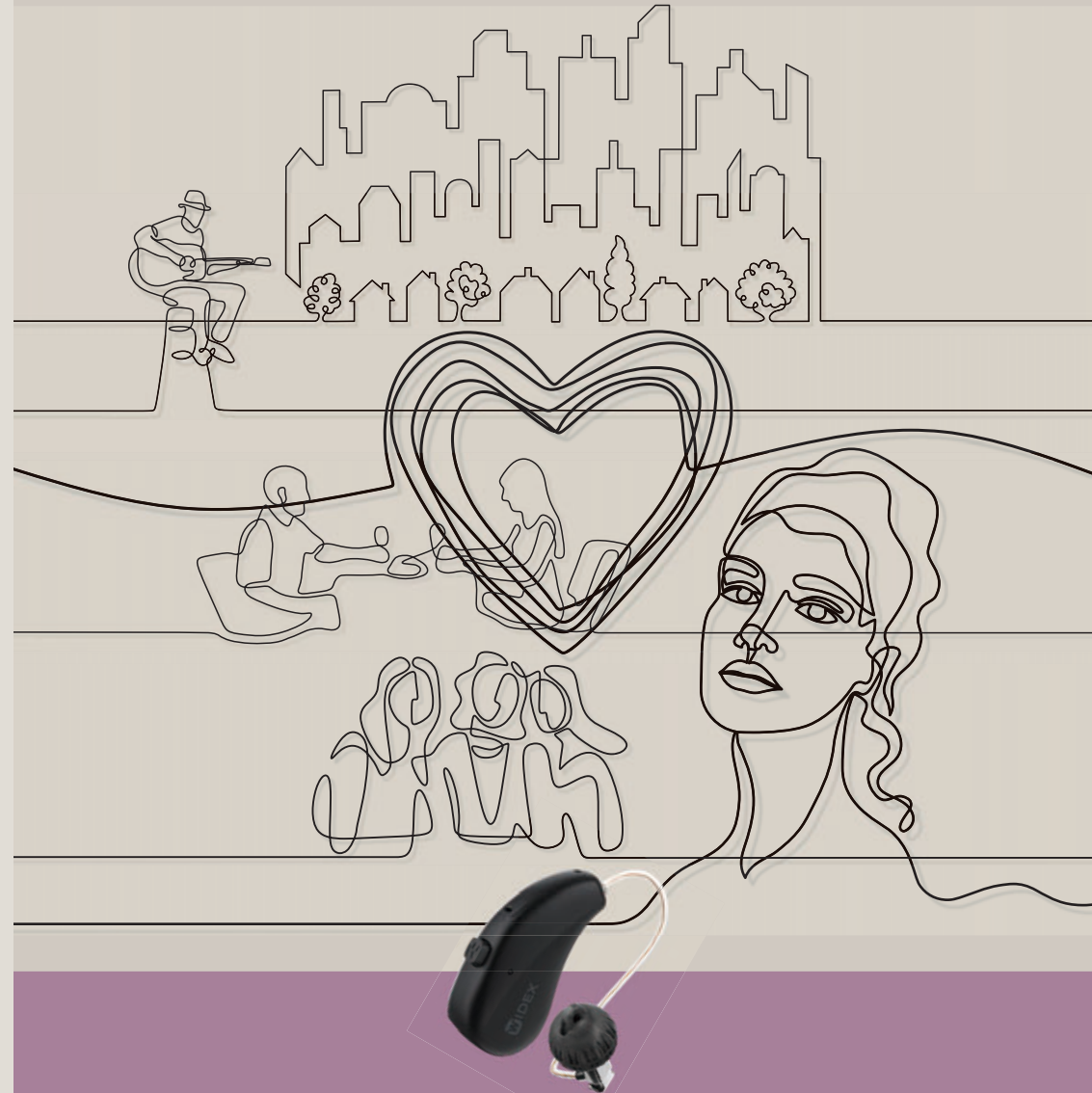

Most Natural Sound

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

モスト ナチュラル サウンド

Most Natural Sound

すべての人たちに自然な聞こえを
それがワイデックスの願いです

どんな人でも聞きたい音が聞こえ、
補聴器をつけていることすら

忘れてしまうような自然な音を世界中の人に届けたい。

ただ聞こえを補うだけでなく、
一人ひとりの人生がもっと輝くように。

目次

ワイデックスの願い/目次	2	ワイデックスの補聴器	
日野皓正さんからのメッセージ	4	ワイデックス モーメント	36
山本一力さんからのメッセージ	6	ワイデックス マグニファイ	50
聴く。遊ぶ。生きる。PLAY-EAR!	8	ワイデックス イヴォーク	58
ワイデックスについて	12	ワイデックス エンジョイ	64
		ワイデックス ユニーク	68
		重度難聴用補聴器	72
		総合支援法について	73
		アクセサリ	
		ワイデックス クロス	74
		耳かけ型補聴器用別売パーツ一覧	76
		便利なアクセサリ	79
		ワイヤレスアクセサリ	82
		データ・保証等	
		聴力適合範囲	84
		搭載機能一覧	86
		周辺機器対応一覧	88
		スマートフォン対応一覧	90
		性能一覧表	92
		保証とアフターサービス	94
		ワイデックス リワード	98
音作りへのこだわり			
センソグラム	16		
フィードバックテスト	17		
トゥルー インプット テクノロジー	18		
ISP (統合信号処理)	19		
聴力の低下について			
聴力低下の正しい理解	20		
聞こえ方のチェック	22		
補聴器の選び方			
補聴器選びの流れ	24		
見た目や使い勝手でモデルを選ぶ	26		
ワイデックスの充電式補聴器	30		
スマートフォンとつながる	32		
性能や技術でシリーズを選ぶ	34		

ワイデックス
サウンドパートナー
日野皓正さんからの
メッセージ

ワイデックス サウンドパートナーは、ワイデックスの音づくりの哲学に共感し、毎日をアクティブに楽しむ人たち、そして、補聴器の素晴らしさとワイデックスの「Most Natural Sound.」を、より多くの人に伝えていく大切な仲間です。



自然が一番だと思う。生き方にしても、音にしても。

ジャズ・トランペッター

日野皓正さん

いい音楽を演^やりたいから、
音にはこだわりたいんだ。

ミュージシャンなのに補聴器をつけていることを知られるのは嫌ですか？って聞かれるんだけど、そんなこと考えたこともないよ。いい音楽が演^やれるんだったら、補聴器でもなんでも使えばいいんだ。お客さんが喜んでくれるのが一番なんだから、音楽で評価して欲しいって思うんだ。ただ、僕にとっての補聴器は、音が聞こえればいい

わけじゃなくて、どんな風に聞こえるかがとても大切。楽器と同じで、補聴器の音にも個性みたいなものがあるみたいだね。

自然な音は、人の想いも
自然に伝えてくれる。

アメリカにいる妻と電話で話す時も、最後に「愛してるわ」って言われて、僕も「キミのこと、尊敬してるよ」って電話を切るんだけど、気持ちまで伝わってくる気がするね。



補聴器をつけ始めたのは10年くらい前からかな。生活が昔に戻ったように豊かになったよ。人生観もコロナをきっかけに変わったなあ。人とのつながりをすごく大切に思うようになった。じゃあ、僕に何ができるかという、音楽を演^やり続けること。みんながハッピーになれる音を、生きている限り追求していかなきゃって思っているんだ。

※補聴器の品質、効果効能、安全性等を保証するものではありません。
※装用者個人の感想です。

PROFILE

日野 皓正 (ひの てるまさ)

1942年東京都生まれ。1967年に初リーダーアルバムをリリース後、“ヒノテル・ブーム”を巻き起こす。1989年にはジャズの名門レーベル“ブルーノート”と日本人として初契約。その後も、オリジナリティと芸術性の高さを誇るアーティストとして国際的に活躍中。「旭日小綬章」をはじめ受賞歴多数。

迷っているうちに、
人生、色褪せてしまう。



直木賞作家

山本一力さん

ある日突然、 聴き慣れた映画音楽に異変が・・・

私が聞こえ方に違和感を抱いたのは、『冒険者たち』というフランス映画の音楽を聴いたときでした。大好きで、何度も観てきた映画です。タイトルバックに口笛でメロディが流れてくるのですが、それがものすごく音痴に聞こえたのです。音が歯抜けになっていた。「俺の耳、どうなったんだ？」って、ショックでしたね。ただ、そのときにはまだ補聴器をつけませんでした。ところが、71歳のときに初めて補聴器をつけて、驚いた。まず、自分の靴音が、「コツ、

コツ、コツ」と耳に飛び込んできた。長らく消えていることにも気づいていなかった音が、戻ってきたという嬉しい驚きは、経験者にしかわからないと思いますね。

音ばかりでなく、 気配や空気感まで伝えてくれる。

人との会話でも、お互い気持ちが乗ってくると息づかいが変わりますよね。その息づかいを感じとれるかどうかで、コミュニケーションも変わります。補聴器をつけるようになって、編集者と話をするときの気配が全く変わった。原稿に意見を言うときは、

ワイデックス サウンドパートナーは、ワイデックスの音づくりの哲学に共感し、毎日をアクティブに楽しむ人たち、そして、補聴器の素晴らしさとワイデックスの「Most Natural Sound」をより多くの人に伝えていく大切な仲間です。



相手もやっぱり気合いを入れるんでしょうね。その気合いを、感じとれるようになったのです。補聴器というのは不思議なもので、つけると気配や空気が違ってきます。そうすると、自分の意識まで変わる。すごいもんだと思います。

私は、原稿と向き合うときは意図的に補聴器をつけません。で、一気に原稿10枚くらいを書き上げたあと、次をどう展開させようかと考えるときに補聴器をつける。そうすると、空気感がまるつきり変わるんです。グッと物語の中に入っていける。それぞれの登場人物の声まで、自分の中で響いてきます。物書きの私にとって、今や補聴器は欠かせないのですよ。

人生を大事に使いたいなら、 今できることは今すぐやるべき。

『冒険者たち』の口笛がおかしいと思ったと

きが55歳。そこから20年近く、時間を無駄に積み重ねてきてしまったと痛感します。あ のときすぐに補聴器をつけていたらどんなに良かったか。これから補聴器をつける人には、迷わずすぐにつけなさいと言いたい。自分の人生を大事に使いたいなら、今できることはすぐにやった方がいい。

※ 補聴器の品質、効果効能、安全性等を保証するものではありません。
※ 装用者個人の感想です。



PROFILE

山本 一力 (やまもと いちりき)

1948年高知県生まれ。1997年「蒼龍」で第77回オール読物新人賞を受賞し、作家デビュー。2002年、「あかね空」で第126回直木賞受賞。執筆や講演活動に精力的に取り組む一方、音楽や映画にも造詣が深く、公私にわたり充実した毎日を送られている。

聴く。遊ぶ。生きる。 PLAY-EAR!

補聴器をパートナーに、
人生をいきいきと
謳歌する人たちが増えています。
ワイデックスは、
そんな「プレイ・イヤー！」な生き方、
「プレイヤー（現役）」な人々を、
応援しています。

PLAY-EAR! 1

音楽を満喫する日々。

聴くことが、


人生を豊かにしてくれる。

堺進さん
70代



NYまでコンサートに行くほど
音楽が好き。
美しい音には聴き惚れてしまう。

若い頃からゴルフと音楽が好きです。それは今でも変わりません。ポップス系の音楽をよく聴きますが、特に歌唱力のある女性ボーカリストが好きですね。あるアーティストのコンサートで、ニューヨークのカーネギーホールまで行ったこともあります。女性の声ならではの美しさが大好きなんです。高音の最後のビブラートや伸び、そんな音の豊かさや繊細さをずっと感じていたいというのも、補聴器をつけようと思った理由のひとつです。

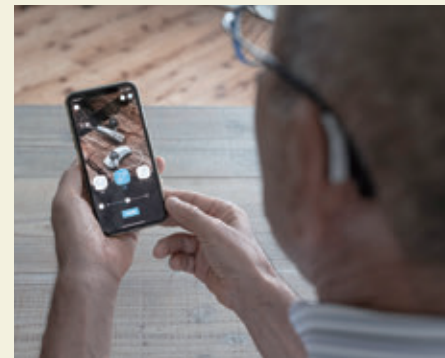

今どきは、補聴器もスマートフォンと連動。ワイヤレスイヤホンとして音楽も電話もこれで聴ける。

コンサートでは、補聴器を「ミュージック」に設定します。普段は周りの環境に合わせて雑音を抑える「万能」、電車では騒音をしっかり抑える「快適」というふうに使っています。スマートフォンと連動しているので、スマートフォンをリモコン代わりにして

好みの音を設定できます。音楽を数百曲スマートフォンに入れているのですが、それを聴くときは、補聴器がワイヤレスイヤホンとして使えます。電話の声だって、補聴器で直接聴けるんですよ。ちょっとカッコイイですよ。

環境さえ整えれば
人生はずっと楽しいまま。
補聴器は、今を楽しむための投資。

今も、週に1回はゴルフに行っています。ボールを打った時の音って、ゴルフの醍醐味の一つだと思うんです。うっかり補聴器をつけ忘れたときは、ゴルフが全然楽しくなかったですよ（笑）

歳をとると、捨てなければならぬことが増えてくる。でも、楽しむことを捨てずにこれたという実感があります。人生をどう楽しくするか、そのための環境を整えるのは自分にしかできない。私にとって補聴器は、今を楽しむための投資です。

※補聴器の品質、効果効能、安全性等を保証するものではありません。
※装用者個人の感想です。





PLAY-EAR!2

何もあきらめず、
アクティブな自分のまま
生きていける。

藤田まゆみさん
フリー編集者
50代



旅先で、なにげない会話を楽しむ。 そんなときも、耳はとても大事。

旅行が趣味で、特に離島巡りが好きです。20代の頃から島に行き始めて、数えてみたら今までに200島以上訪れていました。旅は、いつもひとりと決めています。観光地じゃない島などにひとりで行くとき地元の人がいざと声を掛けてくれるんです。「うちの畑でとれたミカン、持って行きなさいよ」とか、「今日は棟上げ式があるからいらしゃい」と宴会に呼ばれたこともあります。そういうふれあいが、旅の一番の楽しみ。そのためにも、耳って大事なんです。

虫の声、せせらぎ、雷鳴、スキーの音。 すべて私にとって大切な音。

沖縄の西表島には毎年行くのですが、このごろ蝉が鳴いていないなあと思っていた時期があったんです。その時はわからなかったんですが、自分の聴力が低下していたんですね。耳って聞こえないと、音そのものがないと思ってしまいます。

虫の声だけではなくありません。山を歩くときの沢のせせらぎの音、遠くで鳴っている雷鳴、



ゲレンデを滑るときに後ろから近づいてくるスキーの音。私の生活に欠かすことのできない音なんです。耳が聞こえなくて落ち込んだ時期もありましたが、仕事はもちろん、旅などの趣味も、以前と何も変わらず続けていけることがうれしいですね。

※補聴器の品質、効果効能、安全性等を保証するものではありません。
※装用者個人の感想です。



PLAY-EAR!3

音を感じながら走ることで、
楽しさも高揚感も
味わえる。

小貝 鋼さん
グラフィックデザイナー
70代



鳥のさえずりに、 季節を感じるランニング。 今も毎年、レースに参加している。

ランニングを始めたのは、20代の頃です。会社の先輩に誘われて皇居1周マラソン大会に参加したのがきっかけですね。あの頃はフルマラソンに出ていて、30代半ば頃には3時間を切ったこともあるんですよ。いろいろな大会に出たなあ。今は、ハーフマラソンですね。レースに出るのは年4回くらいです。普段は家の近所を走っているんですが、鳥の声なんか聞こえて気持ちいいですよ。メジロの声が聞こえてくると、春も近いなあなんて季節を感じますね。

ランニングの足音や レース前のざわめき。 ワクワクするのも、音があってこそ

ランニングをしている時って、意外と自分の足音が聞こえるものなんです。自分では音も立てずに軽やかに走っているもんだと思いついていたんですが、実際は、聞こえにくくなっていましたね。補聴器をつけるようになって、ああ、ランニングってこんなに足音が

していたんだと。発見でしたね。それと、レース前のざわめきも。そういえばこんなだったと思いついた。昔、河口湖マラソンに出たときに、あのざわめきでいよいよスタートが近づいてきたって高揚感があったね。本当にワクワクしたのを思い出したんです。ランニングがますます楽しくなってきました。これからもずっと楽しんでいきますよ。



※補聴器の品質、効果効能、安全性等を保証するものではありません。
※装用者個人の感想です。





DENMARK

福祉大国デンマーク生まれの 補聴器専門メーカー

国民の幸福度が高い国として知られるデンマーク。福祉国家でもあるこの国では、多くの方が比較的若い世代から補聴器を愛用し、生き生きとした暮らしを楽しんでいます。

補聴器専門メーカー ワイデックスがデンマークで生まれて60年余り。ワイデックスの補聴器は革新的技術と定評ある音質の良さで、世界100ヶ国以上のユーザーに愛されています。

クリーンな環境から生まれる 補聴器

革新的で、省エネ、そして風力発電の活用。ワイデックス本社社屋では、いま世界的に注目されている環境への配慮を大きく反映しています。

デンマーク初の地下水を活用した地熱発電により、1年間の冷暖房に必要な電力をまかなうことができ、また太陽光発電と雨水の再利用を行うなど、最先端のエコシステムを導入、CO2排出をゼロに抑えた補聴器づくりを行なっています。

その中でもワイデックス最大の環境への貢献は風力発電です。敷地内にある風車で1年間のワイデックス使用量を上回る電力を供給することができ、風力エネルギーを使用する企業に与えられる消費者向けラベル「WindMade」を世界で初めて取得しました。



WINDMADE™




60年以上の歴史で培われた 技術とパイオニア精神

「良い補聴器をつくるためには、一切の妥協をしない」

ワイデックス創業者の志を受け継ぎ、私たちは新しい発想と独創性に満ちた技術開発で、数々の革新的な製品を世に送り出してきました。

世界初の耳あな型フルデジタル補聴器「センソ」は、“補聴器の革命”として世界中で大きな反響を呼び、補聴器のデジタル化のさきがけとなりました。

聞こえに悩むすべての人たちの毎日の生活がより良くなるような補聴器をつくりたい。創業から60年以上経った今も、創業者二人のかかげた信念は世界中のワイデックス社員の心の中に息づいています。

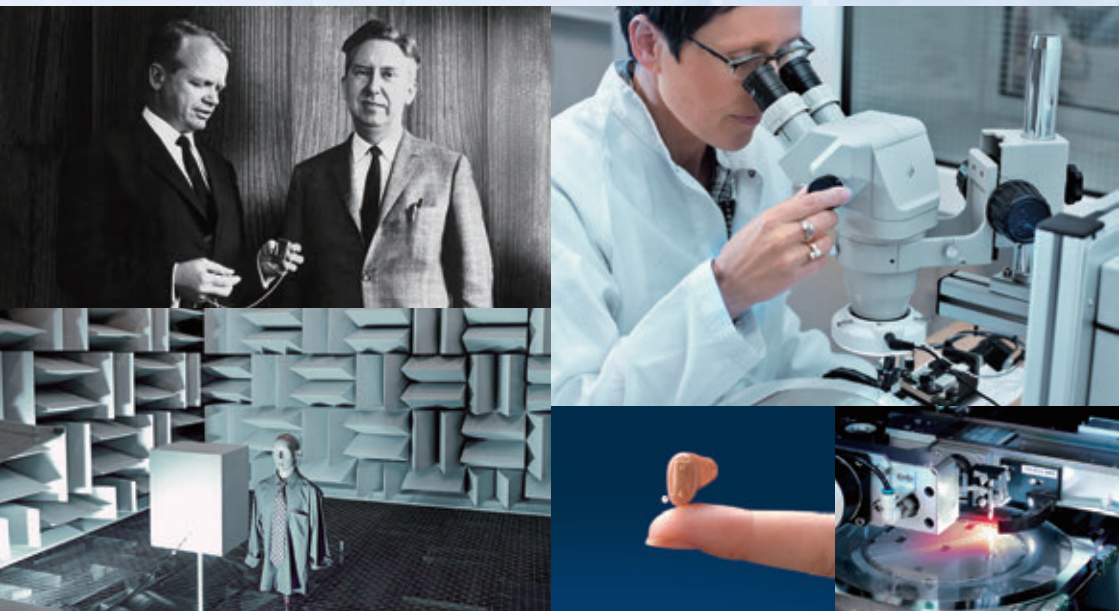

ワイデックスの音づくりの哲学 「Most Natural Sound」

家族や友人の声、テレビや音楽、ペットの鳴き声、
木々の揺れる音、街のざわめき・・・。

毎日当たり前のように私たちのまわりにある、かすかな音から大きな音まで。人との会話だけでなく、自然にあふれるすべての音をありのままに再現すること。ワイデックスはその理想を追い求め続けています。

どんな人でも聞きたい音が聞こえ、つけていることすら忘れてしまうような補聴器、まるで自分の耳のようにすべての機能を自動でやってくれる補聴器をつくること。ワイデックスの代名詞でもある「Most Natural Sound (モスト ナチュラル サウンド)」は、こうした音づくりの哲学から生まれました。


ただ聞こえを補うだけでなく、一人ひとりの人生がもっと輝くように。
それがワイデックスの願いです。

音 し く り へ の こ だ わ り

精確かつスムーズな調整を可能にする ワイデックス独自の『センソグラム』。


耳の大きさや形は人それぞれ。そのため聞こえ方も異なります。
ワイデックスでは、独自の「実耳測定」によって得られた測定データ
『センソグラム』を調整に活かすことで、一人ひとりのニーズによりきめ細かく
対応した満足度の高い聞こえを、手間をかけることなく提供できます。

一般的な測定方法の場合

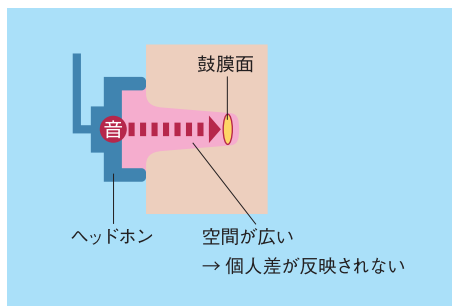

本来、耳あなの大きさや形状には個人差があり、聞こえ方には違いが生じます。しかし、ヘッドホンを使用する一般的な測定方法では、音の出口から鼓膜までの空間が広いので測定結果に個人差がほとんど反映されません。したがって、補聴器の調整時に、別途個人差を考慮する必要があります。

ワイデックスの「実耳測定」の場合

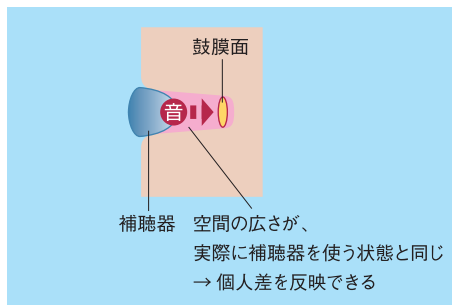

実際に補聴器を着けた状態で測定し、初期調整を行います。実耳の測定データである『センソグラム』には、耳あなの大きさや形状による個人差が反映されます。これをもとに補聴器の初期設定を行うため、より精確な調整をスムーズに行えます。

音 し く り へ の こ だ わ り

最適な聞こえを短時間で実現。 音漏れの量にも着目した 『フィードバックテスト』。

「良い補聴器をつくるためには、一切の妥協をしない」という
ワイデックスのこだわりは、とすれば見落とされがちな耳せんとの隙間からの
音漏れに着目した独自の『フィードバックテスト』にも反映されています。


補聴器の耳せんと耳あなの間には必ず隙間が存在しており、その隙間からどうしても音が漏れてしまいます。この音漏れ量についても測定を行い、使う人に合った調整や適切な耳せんの提案も行うので、満足度の高い聞こえを提供できます。
また、フィードバックテストを行うことでハウリングの防止にもつながります。



身のまわりのさまざまな音を ありのままに届けるために。 『トゥルー インプット テクノロジー』。

補聴器に入ってくる音の限界を拡張、できるだけたくさんの音をとらえることで、忠実な音の再現を目指しています。

いくら優れた音声処理技術を搭載した補聴器でも、音が入ってくる段階で音声情報が劣化してしまっている、満足できる聞こえは提供できません。『トゥルー インプット テクノロジー』によって、補聴器が取り込むことのできる音の範囲が拡張され、入力音の劣化が少なくなりました。かすかな音から大きな音まで、補聴器に入るすべての音を的確に処理することができるので、臨場感のあるより自然な聞こえを実現できます。

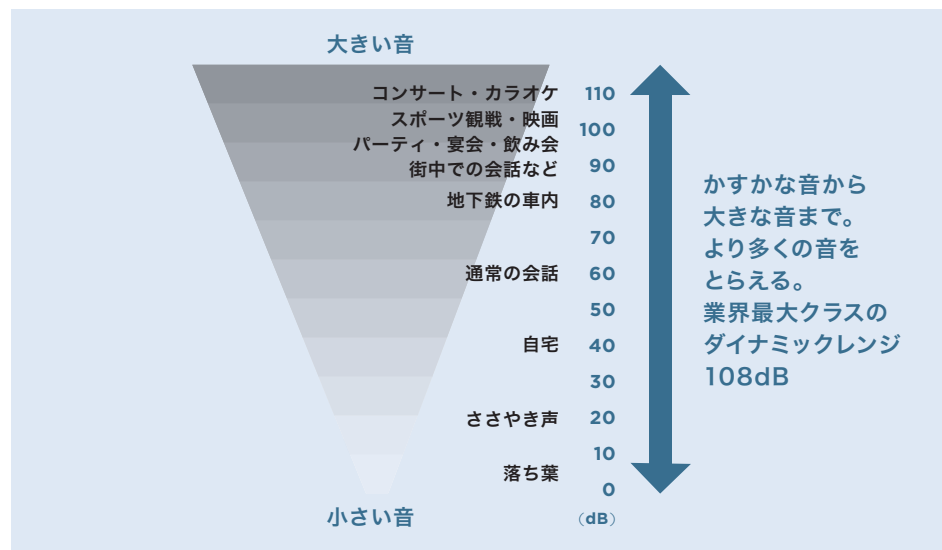


搭載機種は P86-87参照

「音が自然で、言葉が聞き取りやすい」 ワイデックスの理想に近づくための 『ISP (統合信号処理)』。

補聴器に搭載されたさまざまな機能が連携して瞬時に最適な音声信号処理を行う。それが、ワイデックスの『ISP (統合信号処理)』です。

最新の補聴器には、周囲の音の分析、言葉の強調、ユーザーの聴力の考慮など、多くの機能を同時に働かせることが求められています。しかし、さまざまな機能が連携せずにバラバラに働いてしまうと快適な聞こえを提供することはできません。また、騒音を制御する機能が優先され過ぎると、聞きたい言葉が聞き取りにくくなってしまいます。ISP (統合信号処理) では、さまざまな機能が連携し、瞬時にバランス良く最適な処理を行います。このため音が自然で言葉が小さくなりやすく、騒音が多いところをはじめ、さまざまな環境でよりスムーズな会話を楽しむことができます。

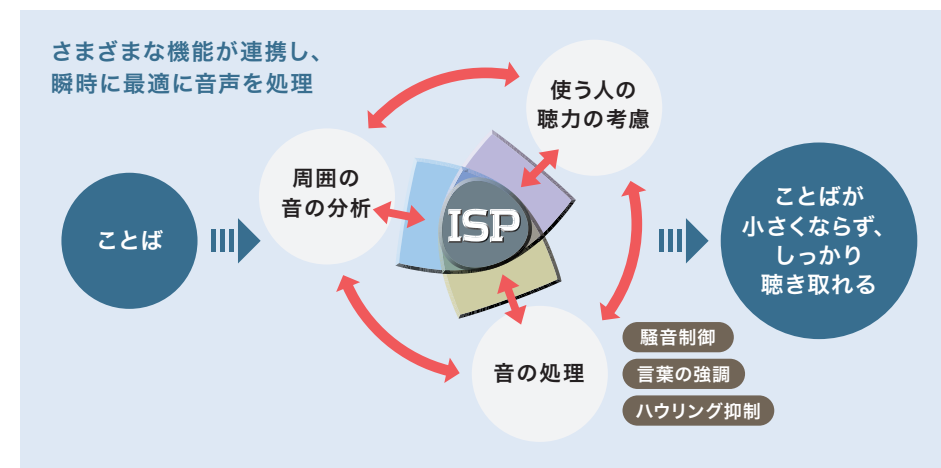


本カタログ掲載の全シリーズに対応

聴力の低下について 正しく理解しましょう。

加齢による聴力の低下は 誰にでも起こる可能性があります。

最近聞き間違いが多い、声は聞こえていても何を言っているのかわからない、テレビの音が大きいと言われる・・・自分では気付いていなくても、家族や周囲の人から指摘されることはありませんか。聴力の低下はなかなか自覚しにくいものですが、年齢を重ねることで誰にでも起こる現象だといわれています。

□ 加齢による聴力低下のイメージ図

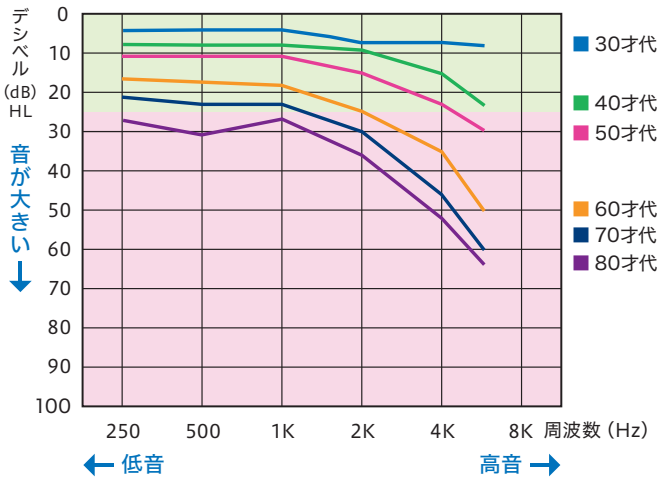


個人差はありますが、加齢による聴力の低下は40代から始まるといわれています。高い音から聞こえにくくなり、左右の聴力が同じレベルで低下していくのが特徴です。

一般的に縦軸25dBぐらいの聴力レベル(ピンクの範囲)からが、補聴器の使用を検討する目安といわれています。

音声情報の周波数分布のイメージ

「声は聞こえているのに、何を言っているのかわからない」という現象や聞き間違いは、「あ、い、う、え、お」といった周波数の低い母音に比べ、周波数の高い子音を聞き取りにくくなっていることから起きるといわれています。


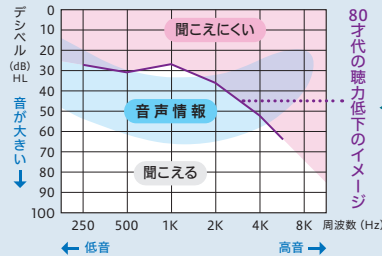


音声情報の一部が聞こえにくくなっています


聞こえにくくなるのはなぜだろう。

音は耳介から外耳道に入り、その奥の鼓膜を振動させ、ツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨を通して蝸牛に達します。蝸牛の内部には音の強弱や高低を分析し電気信号に変える有毛細胞が並んでいます。そして有毛細胞の分析結果は聴神経を通して脳に伝達され、そこで音として認識されるのです。聴力の低下はこうした耳の各部分とその役割を十分に果たせなくなった時に起こり、大きく分けて3つのタイプがあります。加齢による聴力の低下は、感音難聴で、一般的には医学的な治療による改善は困難だといわれています。

□ 耳の構造図

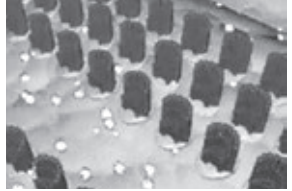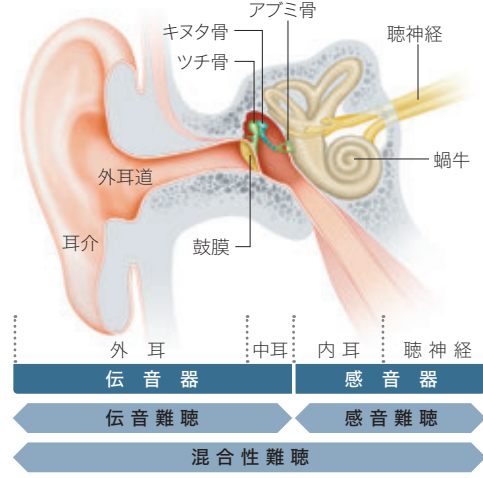

正常な有毛細胞。

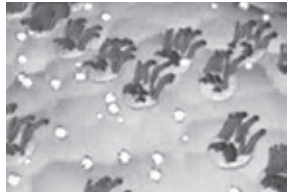

障害を受けた有毛細胞の再生は難しいといわれています。

❗ ありませんか。こんな聞き違い。

- さとう(佐藤)さん ➡ かとう(加藤)さん
- ちょうじょ(長女) ➡ しょうじょ(少女)
- ばんち(番地) ➡ だんち(団地)

ご家族といっしょに 聞こえ方をチェックしてみましょう。

☑ チェックポイント

- 会話をしている時、しばしば聞き返すことがある。
- 小さな話し声やささやき声が聞き取りにくい。

はい 1つでも「はい」があったら下に進む

- 隣の部屋や後方で行われている会話には気づかないことがある。
- 時々、テレビやラジオの音が大きすぎると注意される。
- 話を正確に聞き取れないのに、相づちを打つことがたびたびある。

はい 1つでも「はい」があったら下に進む

- 電話の音が聞き取りにくいことがある。
- 銀行、役所、病院などで名前を呼ばれても聞き逃すことがある。
- 非常に大きな声での会話のみ聞き取れる。

はい 1つでも「はい」があったら下に進む

- 大きな声で正面から話をされても聞き取れないことが少なくない。
- 目の前の電話のベルが聞き取れない。

はい 1つでも「はい」があったら下に進む

いいえ

すべて
「いいえ」だったら
こちらに進む

推定聴力レベル

正常

ほとんど
不自由しない

聴力レベル
dB (HL)

0

補聴器の必要度

補聴器を必要としません。

25

軽度

二度聞きしたり
聞き間違える
ことがある

補聴器の使用を考えてみてはいかがでしょうか。
聴力の低下による聞き間違いや生返事による誤解、トラブル、仕事上の支障が起こる可能性があります。

40

中度

大きめの声
でなければ
聞き取れない

毎日の生活に補聴器をお役立てください。
聞こえが原因でコミュニケーションがうまくいかなくなると、家族や周囲の人との関係に影響することもあります。

70

高度

耳元での大声
でなければ
聞き取れない

周囲のためにもぜひ補聴器を活用しましょう。
周囲の人とのコミュニケーションが疎遠になるだけでなく、日常生活にもかなりの困難が生じているかもしれません。

90

重度

耳元での
大声でも
聞き取れない
ことがある

できるだけ早く補聴器をお使いください。
会話や電話のベルだけでなく、自動車のクラクションなどが聞き取れなくなると、自分や周囲の人に危険が及ぶ恐れがあります。

! 聴力の低下は自分では気がつきにくいものです。

「この頃、会話がちょっと・・・」なんてことありませんか？
自分では気がついていないかもしれません。ぜひご家族と一緒にチェックしてみてください。

次ページから補聴器の選び方を解説しています

※推定聴力レベルと補聴器の必要度のコメントはあくまでも目安です。
※自己チェックだけでなく、耳鼻科の専門医もしくは補聴器取扱店にご相談ください。

さあ、あなたにぴったりの補聴器と出会しましょう


より多くの方々に最適な聞こえ方を提供するため、ワイデックスは最新技術を投入した上位機種からお手頃な機種まで、さまざまな補聴器をご用意しています。補聴器選びの第一歩は、カウンセリングと聴力測定から。あなたにぴったりの補聴器と出会しましょう。



このような症状がある方は、耳鼻科の専門医に補聴器の使用についてご相談ください。

- 耳の手術を受けたことがある。
- 耳だれ、耳鳴り、耳の痛み、めまいなどの自覚症状がある。
- 中耳炎を患っている。
- 耳あかが大量に出る。
- 聴力が急激に衰えた。

ご購入までの流れ (例)

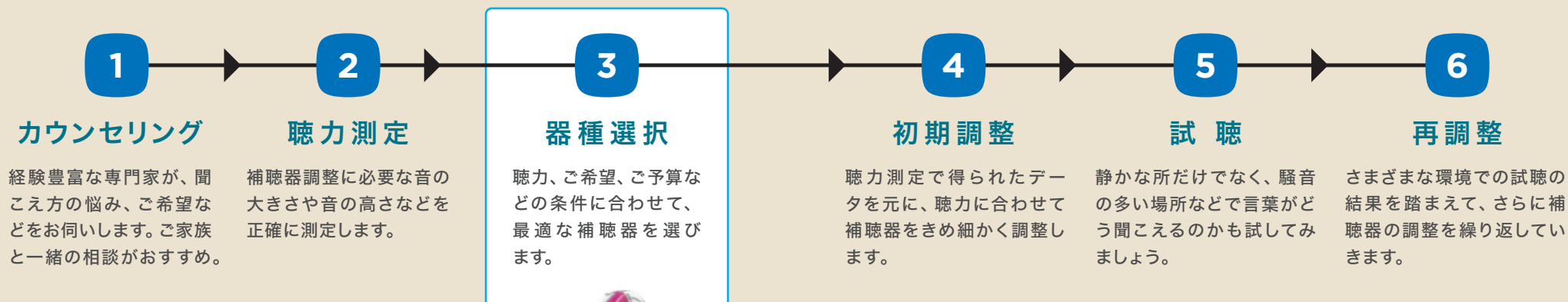

補聴器の選び方

補聴器の選び方


ワイデックスの補聴器を選ぶポイント

見た目や使い勝手でモデルを選ぶ

最近の補聴器は目立たないものや、おしゃれでカラフルなものなど、さまざまなタイプが揃っています。最近では充電式やスマホと接続できるモデルも人気です。

基本性能や搭載技術でシリーズを選ぶ

ワイデックスの補聴器はシリーズによって基本的な性能や搭載されている技術が異なります。

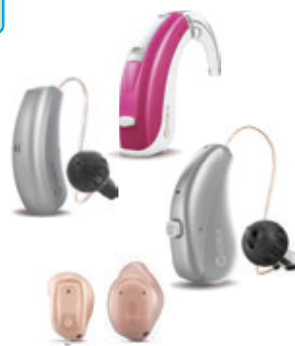

WIDEX MOMENT™

補聴器は両耳につけると効果・満足度の向上が期待できます。

- 音との距離感や方向が把握しやすくなります。後方から接近する車の音にも、いち早く気づきやすくなります。
- 騒音が多い街中や、人がたくさん集まる場所でも言葉がより聞き取りやすくなります。
- 両耳で聞くことで左右それぞれの補聴器の音量を抑えることができるため、疲れにくくなります。



片耳装用に比べて
両耳装用の満足度 1.8倍向上

騒がしい場所での会話に関しては、両耳装用の満足度は片耳装用に比べて1.8倍というデータがあります。(出典: Japan Trak 2018)

※ 両耳装用の効果は、両耳の聴覚能力の状態により異なります。

見た目や使い勝手でモデルを選ぶ

補聴器には大きく分けて「耳かけ型」と「耳あな型」があり、耳かけ型にはよりコンパクトなRICタイプもあります。また、ほとんどの補聴器は空気電池で動きますが、最近では電池交換の必要がない充電式の補聴器も登場しています。聴力はもちろん、使い勝手やサイズ、デザインなど、それぞれの特長を知って、自分に合った補聴器を見つけましょう。

○ 補聴器のサイズはほぼ原寸大です。

※ 画像はイヤモールド（別売）を装着した状態のイメージです（RICタイプを除く）。

充電式

電池交換の作業が必要なく、置くだけで簡単に充電できます。電池のふたがない構造で、水分やホコリが入りにくくなっています。

耳かけ型 [RICタイプ]

- ✓ 音を出す部分を本体と分離したことで、コンパクトで目立ちにくい。
- ✓ 先端部分の変更で幅広い聴力に対応可能。

耳かけ型

- ✓ 取り扱いやすい。
- ✓ 幅広い聴力に対応可能。
- ✓ 電池寿命が長い。
- ✓ 電池の残量がわかる。

sRIC R D / mRIC R D



軽度 中度 高度

BTE R D



軽度 中度 高度 重度

ワイデックスの補聴器は
水やホコリに強い

ワイデックスの補聴器は、防塵防水国際保護等級最高レベルIP68です。

※MENU SPは、IP58です。



○ 補聴器のサイズはほぼ原寸大です。

空気電池式

定期的に電池交換を行います。使用する電池によって、サイズや電池寿命が異なります。

耳あな型

- ✓ 耳あなに収まり目立ちにくく、眼鏡やマスクをする際にもおすすめ。
- ✓ 耳型に合わせて作るので耳にぴったりフィット。


CIC-M / CIC



軽度 中度 高度

90のみ

IM / IP

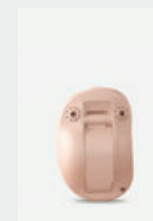

軽度 中度 高度

IPのみ

XP



軽度 中度 高度

見た目や使い勝手でモデルを選ぶ

○ 補聴器のサイズはほぼ原寸大です。
 ※ 画像はイヤモールド（別売）を装着した状態のイメージです（RICタイプを除く）。

空気電池式

定期的に電池交換を行います。
 使用する電池によって、サイズや電池寿命が異なります。

耳かけ型 [RICタイプ]

- ✓ 音を出す部分を本体と分離したことで、コンパクトで目立ちにくい。
- ✓ 先端部分の変更で幅広い聴力に対応可能。

RIC 10 / PA



RIC 312 D / F2 / FS



耳かけ型 [ハイパワータイプ]

- ✓ 重度難聴にも対応可能。

SP



耳かけ型は目立たない細いチューブを選択することもできます。



耳かけ型

- ✓ 取り扱いやすい。
- ✓ 長い電池寿命や重度難聴対応モデルなどバリエーション豊富。

BTE 312 / FM



FA



BTE 13 D / BTE 13



FP



簡単便利で人気の充電式補聴器

電池交換不要でらくらく。 故障にも強いのが特長です。

ワイデックスのリチウムイオン充電式補聴器は、夜間に充電しておけば、翌日は電池切れの心配なく使えます。また、電池のふたがない密閉構造で湿気やホコリが入りにくく、接点がない非接触充電のため故障しにくいのも特長です。充電器に置くだけで簡単充電。面倒な操作不要で使いやすい充電式補聴器は下記からお選びいただけます。

3モデルから



2シリーズから

WIDEX MOMENT™ シリーズ

ワイデックスの最新技術を詰め込み
究極のナチュラルサウンドを実現した
最高峰シリーズ

補聴器本体価格 (非課税)	
MOMENT 440	片耳: 610,000円 両耳: 1,070,000円
MOMENT 330	片耳: 365,000円 両耳: 640,000円
MOMENT 220	片耳: 280,000円 両耳: 474,000円
MOMENT 110	片耳: 200,000円 両耳: 320,000円

シリーズ詳細は、P36をご参照ください。

WIDEX MAGNIFY™ シリーズ

MOMENTの性能を受け継いだ
コストパフォーマンスに優れた
最新シリーズ

補聴器本体価格 (非課税)	
MAGNIFY 100 [M10]	片耳: 160,000円 両耳: 270,000円
MAGNIFY 50 [M05]	—
MAGNIFY 30 [M03]	—


シリーズ詳細は、P50をご参照ください。

○各シリーズ、モデルともに別売の充電器が必要です。
(P31参照)

ワイデックスの充電式補聴器なら…

らくらく

- 電池を交換する手間が不要!
- 電池を買いに出かけなくても大丈夫!
- 置くだけで、かんたん確実に充電できる!

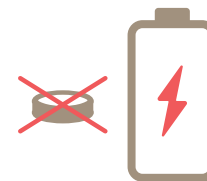

あんしん

- 就寝前に充電しておけば、翌日に電池切れの心配なく、1日しっかり使える。*
- 密閉構造で湿気やホコリの浸入を防ぐため故障しにくい。
- 除菌乾燥も一緒にできる充電器なら快適、安心。

4時間の満充電での使用可能時間	sRIC R D mRIC R D	ストリーミング使用なし	約 20 時間	ストリーミング4時間使用含む	約 18 時間
4時間の満充電での使用可能時間	BTER D	ストリーミング使用なし	約 36 時間	ストリーミング8時間使用含む	約 24 時間

*使用できる時間は、補聴器の使用状態や環境によって異なります。

除菌乾燥充電器 (別売)

充電・除菌・乾燥がこれ一台で完結。日々のお手入れが簡単に。

sRIC R D / mRIC R D 用: WPC 1

33,000円 (税込)



BTER D 用: WPC 2

33,000円 (税込)



スタンダード充電器 (別売)

置くだけでかんたん充電。
持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。

sRIC R D 用: WPT 3 / mRIC R D 用: WPT 1 /
BTER D 用: WPT 2

20,000円 (税込)



WPT 3

WPT 1 (WPT 2はスリットの形状が異なります)

スマートフォンで、 もっと快適、もっと便利に。

通話はもちろん、
音楽や動画もいい音で楽しめる。

補聴器は本来の機能に加えて、スマートフォンとつながることでさまざまなことができるようになりました。電話の声をクリアに聞く、補聴器で音楽を楽しむ、リモコンとして使いこなす。あなたの世界がもっと広がります。



ダイレクトストリーミング

電話に出ると、相手の声が直接補聴器から聞こえるので、クリアな音声で快適に通話ができます。また、補聴器をワイヤレスイヤホンのように使って、スマートフォンの音楽や動画を楽しむことができます。



補聴器のマイクから入る周りの音をカットして、通話相手の声だけを聞くこともできるので、会話に集中できます。

※ ダイレクトストリーミングはiPhone及びASHA対応のAndroid端末 (MOMENT、MAGNIFY) のみ。
※ ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) とは、Android端末でBluetooth対応補聴器をサポートする通信規格のこと。

アプリを使っているいろいろできる

スマートフォンのアプリを使えば、補聴器を手元で簡単に操作することができます。



音量調節

スマートフォンの画面をタッチするだけで、補聴器の音量の上げ下げができます。




聞きたい方向

講演などで話者の声をしっかり聞きたい時、前からの音を優先的に聞こえるようにできます。



お気に入りプログラム

自分がよく行く場所での最適な音の設定をプログラムとして保存しておき、その場所に来たら簡単に切り替えることができます。

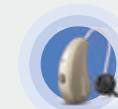

補聴器をさがす

補聴器を失くしたかな?という時に、スマートフォンで補聴器の場所を探せます。



自動で最適な音を提案

世界中のユーザーから蓄積したビッグデータを元に、AIが環境に合わせて最適な音の設定を提案してくれます。

搭載器種は P90-91参照

基本性能や搭載技術で シリーズを選ぶ

補聴器の開発時期や、中枢である回路の処理速度等によって、補聴器の基本性能が異なります。また、AI機能や充電式といった新しい技術が搭載されているかどうかで、できることが変わります。

NEW

MOMENT [モーメント]

詳しくは **P.36**

究極のナチュラルサウンドとAI機能を搭載。
ワイデックスの最高峰。

リチウムイオン充電式

スマホとつながる

高速演算処理 8億回/秒

AI機能

ピュアサウンド

ツールアコースティクス

自動環境適応サウンドクラス

片耳：200,000円～610,000円 両耳：320,000円～1,070,000円



MAGNIFY [マグニファイ]

詳しくは **P.50**

もっと自由に、音楽やテレビを楽しく。
最新の充電式もラインナップ。

リチウムイオン充電式

スマホとつながる

高速演算処理 8億回/秒

ツールアコースティクス

片耳：98,000円～160,000円 両耳：158,000円～270,000円



EVOKE [イヴオーク]

詳しくは **P.58**

ユーザーの好みを学習して、成長する。
ワイデックスのAI補聴器。

スマホとつながる

高速演算処理 8億回/秒

AI機能

自動環境適応サウンドクラス

片耳：170,000円～550,000円 両耳：310,000円～980,000円



ENJOY [エンジョイ]

詳しくは **P.64**

搭載機能を絞り込むことで、
お求めやすい価格を実現。

スマホアプリ

高速演算処理 8億回/秒

片耳：85,000円～150,000円 両耳：140,000円～270,000円



UNIQUE [ユニーク]

詳しくは **P.68**

いつでもどこでも多彩で豊かな音を。
ワイデックスサウンドを体現したシリーズ。

高速演算処理 6億回/秒

自動環境適応サウンドクラス

片耳：130,000円～490,000円 両耳：230,000円～880,000円



MENU [メニュー]

詳しくは **P.72**

多彩な機能、生活防水を備えた
ハイパワーモデル

ハイ
パワー

片耳：98,000円～250,000円 両耳：180,000円～450,000円



※ 価格は補聴器本体の価格（非課税）です。



[モーメント]
WIDEX MOMENT™

2nd Generation

つけていることを忘れるくらい
自然で聞きやすい。

優れた音質とシンプルなデザイン、そして多彩な機能。
ピュアサウンド™で従来の補聴器の概念を変えた
モーメントがさらに進化。

CES® 2021
イノベーションアワード
2部門受賞

ヘルス&ウェルネス部門 ウェアラブルテクノロジー部門

耳あな型補聴器 MOMENT 302AFBZX00031000 耳かけ型補聴器 MOMENT 302AFBZX00034000

環境の変化に対応、言葉を聞き取りやすくする機能

クラス	AI機能	チャンネル数	保証	自動環境適応 サウンド [クラス]	言葉を強調 [スピーチ エンハンサー]	騒音制御 [語音強化]	前方の声を 聞きやすく [ロケーター]
MOMENT 440	●	15	プレミアムサービス 3年+紛失補償 WidexReward (注1)	11 シーン	● リアルタイム	●	●
MOMENT 330	●	12	プレミアムサービス 2年+紛失補償	7 シーン	●	●	●
MOMENT 220	●	10	2年	4 シーン	—	●	●
MOMENT 110	—	6	2年	3 シーン	—	●	●

(注1) P98-99を参照してください。

シリーズ共通の特長

- ワイデックスのAI機能がさらに高度に進化、世界のユーザーデータによるサポートも
- 最新の充電式やスマートフォンの通話や音楽を補聴器で楽しめるモデルもラインナップ
- 初めて着用する人にも高い満足を提供する先進機能を搭載



リチウムイオン充電式 スマホとつながる 高速演算処理 8億回/秒 進化したAI機能 ピュアサウンド トゥルーアコースティクス 自動環境適応サウンドクラス

騒がしい場所や人が大勢集まる場面での使用に特におすすめです

静かな場所での会話 少人数の集まり	複数の人が発言する会議	にぎわっているレストランでの会話	人ごみや交通量の多い屋外での会話	移動する電車やバスの中での会話

環境への対応力



ワイデックスの補聴器



WIDEX MOMENT SHEER™

デザイン、機能がさらに進化。
モスト ナチュラル サウンドの
MOMENT 2nd Generation
SHEER [シアー]。

WIDEX MOMENT SHEER™

ワイデックスの最高峰モーメントシリーズに加わったSHEER [シアー]。透き通るような自然な音、無駄を省いたデザイン、使いやすい機能。補聴器に本当に必要なものを見極め、徹底的にこだわり、磨き上げました。すべてに最高を求める方に。



Most Natural Sound

ワイデックスの補聴器

ワイデックスの補聴器

Design

こだわりを使いこなす喜び



AI

世界中とつながり成長



Rechargeable

らくらく便利な充電式



Bluetooth

音楽も電話も快適




モーメントを支える最新技術

0.001秒へのこだわりが、補聴器の常識を変える。

ナチュラルサウンドを追求しつづけ、ついにたどり着いた『ピュアサウンド™』。これまでの補聴器では解消が難しかった人工的な機械音を取り除きました。



イメージ

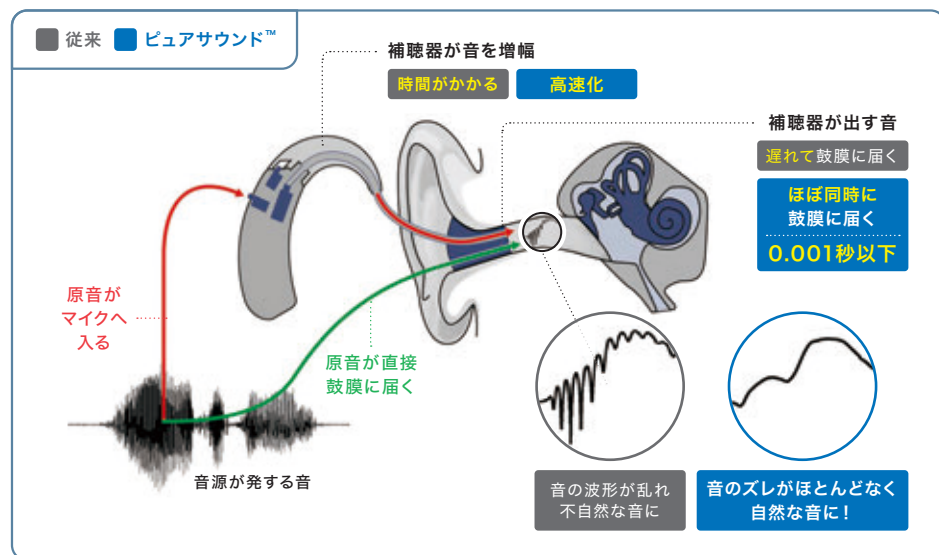

補聴器をつけると、補聴器からの音と耳せんの隙間から直接耳に入る原音が混じり合って聞こえます。一般的に補聴器からの音はわずかに遅れて届くため、その時間差が聞こえ方の違和感となり補聴器特有の人工的な機械音を生み出していました。ワイデックスは、独自技術「ゼロディレイ™テクノロジー」により、音声信号処理速度を超高速化することで補聴器からの音の遅れを限りなくゼロに近づけ(0.001秒以下)、より自然な音質『ピュアサウンド™』を実現しました。特に難聴の程度が軽めな方ほど、この自然な音質を実感できます。

個々の使用状態に合わせてより自然で快適な聞こえ方を実現する『トゥルーアコースティクス™』。

ワイデックスは、耳せんの種類や装用状態などによる補聴器の聞こえ方の違いについて、精密な調査と分析を行いました。その結果に基づき、補聴器の出力補正の精度をさらに高めることで、実生活での聞こえ方を改善しています。



新機能「トゥルーアコースティクス™」は、一人ひとり異なる使用状況に合わせて、クリアで豊かな高音質を実現します。「初めて使う方でも満足度の高い聞こえ」を目指したワイデックスの独自技術です。

モーメントを支える最新技術

絶えず進化を続ける独自のAI機能で、あなたにぴったりの音を。

ワイデックスは、補聴器に最先端のAI機能を搭載。最新シリーズであるモーメントには、新機能「マイサウンド」を搭載し、より簡単にあなた好みの音を実現。今いる場面や好みに合わせてあなたの聞きたい音を届けます。

マイサウンド 2.0 世界中のユーザーがあなたをサポート

ワイデックスは、世界中のワイデックスユーザー自らが行った音質設定を膨大なデータ（ビッグデータ）として蓄積し、絶えずAIによる分析を行っています。このデータは、ユーザーが使用する度に蓄積され、充実していきます。「他のユーザーがあなたと似た状況下でどんな音質設定をしたのか」をAIがビッグデータから素早く検索し、その場に合わせた快適な聞こえが得られるよう、最適な設定を提案します。



※ サウンドセンス ラーンで、さらに自分好みの音を作ることもできます。(次のページ)

サウンドセンス ラーン その場で簡単、好みの聞こえ方に

「もっと聞こえやすくしたい」と思ったらスマホのアプリを起動して、アプリが提案する音から好みのものを選んでいくだけで、簡単に聞こえ方を調整できます。



サウンドセンス アダプト 使うほどに、聞きやすく快適

あなたがどのような環境でどのような操作をしたのかをAIが学習し、使い続けるほど、環境に合わせた好みの聞こえ方へと自動で調整。あなた好みの補聴器に成長していきます。



サウンドクラス

いつでもどこでも、自動で最適に

あなたの周囲の環境を常に分析。自動で、その場に合った音質へスムーズに切り替えます。例えば、静かな店内から騒がしい街中へ移動した時も、音量や音のバランスが自動で調整され、最適な音を届けます。




ワイデックスの補聴器

ワイデックスの補聴器

耳かけ型 [RICタイプ]

耳かけ型

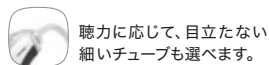

聴力に応じて、目立たない細いチューブも選べます。

リチウムイオン充電式

リチウムイオン充電式

NEW



sRIC R D
[MRR4D]

mRIC R D
[MRR2D]

軽度 中度 高度

軽度 中度 高度



- ・プログラムボタン付
- ・ダイレクト
- ・ストリーミング (注1)

- ・プログラムボタン付
- ・ダイレクト
- ・ストリーミング (注1)

NEW



BTE R D
[MBR3D]

軽度 中度 高度 重度



- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備
- ・ダイレクトストリーミング (注1)

※ 補聴器は非課税です。

MOMENT 440	片耳: 610,000円 両耳: 1,070,000円	補聴器本体の価格です。別売の充電器が必要です。(P47参照)
MOMENT 330	片耳: 365,000円 両耳: 640,000円	
MOMENT 220	片耳: 280,000円 両耳: 474,000円	
MOMENT 110	片耳: 200,000円 両耳: 320,000円	

(注1) ダイレクトストリーミングはiPhone、ASHA対応のAndroid端末のみ。

対応モデルはsRIC R D、mRIC R D、BTE R D、RIC 312 D、BTE 13 Dのみとなります。

除菌乾燥充電器 (別売)

充電・除菌・乾燥がこれ一台で完結。日々のお手入れが簡単に。

sRIC R D / mRIC R D用 : WPC 1

BTE R D用 : WPC 2

- サイズ: 幅83mm×奥行40mm×高さ70mm
- 本体重量: 100g
- 動作時間: 4時間 (充電)、30分 (除菌・乾燥)
- 電源: 付属のACアダプタ
- 1年保証

- サイズ: 幅122mm×奥行58mm×高さ78mm
- 本体重量: 132g
- 動作時間: 4時間 (充電)、30分 (除菌・乾燥)
- 電源: 付属のACアダプタ
- 1年保証

33,000円 (税込)

33,000円 (税込)



WPC 1・WPC 2ともにカスタムイヤチップ・イヤモールドを着けたままでも使用できます。

スタンダード充電器 (別売)

置くだけでかんたん充電。持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。

sRIC R D用 : WPT 3 / mRIC R D用 : WPT 1 /
BTE R D用 : WPT 2

- サイズ: WPT 3 幅77mm×奥行27mm×高さ51mm/本体重量: 85g
WPT 1・WPT 2 幅85mm×奥行29mm×高さ52mm/本体重量: 70g
- 動作時間: 4時間 (充電)
- 電源: 付属のACアダプタまたはUSB接続
- 1年保証

20,000円 (税込)



WPT 3


WPT 1

(WPT 2はスリットの形状が異なります)

dry-cap uv 2と併用すれば充電しながら除菌・乾燥ができます。(P79参照)

耳かけ型 [RICタイプ]

耳かけ型

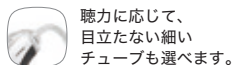

聴力に応じて、
目立たない細い
チューブも選べます。

耳あな型



RIC 10
[MRB0]

軽度 中度

PR536
(10A)

RIC 312 D
[MRB2D]

軽度 中度 高度

重度 HPLシーパーのみ

Bluetooth PR41
(312)

- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備
- ・ダイレクト
- ・ストリーミング(注1)

BTE 312
[MBB2]

軽度 中度 高度

PR41
(312)

- ・プログラムボタン付

BTE 13 D
[MBB3D]

軽度 中度 高度

重度

Bluetooth PR48
(13)

- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備
- ・ダイレクトストリーミング(注1)

CIC-M/CIC
[M-CIC-M/M-CIC]

80 軽度 中度

90 軽度 中度 高度

PR536
(10A)

XP
[M-XP]

軽度 中度

高度

PR41
(312)

- ・テレコイル
無償オプション

IM/IP
[M-IM/M-IP]

軽度 中度

高度 IPのみ

PR41
(312)

- ・ボリューム
コントロール有償
オプション
(片耳:10,000円)
- ・プログラムボタン
無償オプション

※ 補聴器は非課税です。

MOMENT	RICタイプ	BTEタイプ	CIC-M/CIC	XP	IM/IP
MOMENT 440	片耳: 590,000円 両耳: 1,050,000円	片耳: 590,000円 両耳: 1,050,000円	片耳: 590,000円 両耳: 1,050,000円	片耳: 600,000円 両耳: 1,070,000円	片耳: 600,000円 両耳: 1,070,000円
MOMENT 330	片耳: 345,000円 両耳: 620,000円	片耳: 345,000円 両耳: 620,000円	片耳: 345,000円 両耳: 620,000円	片耳: 355,000円 両耳: 640,000円	片耳: 355,000円 両耳: 640,000円
MOMENT 220	片耳: 260,000円 両耳: 454,000円	片耳: 260,000円 両耳: 454,000円	片耳: 260,000円 両耳: 454,000円	片耳: 270,000円 両耳: 474,000円	片耳: 270,000円 両耳: 474,000円
MOMENT 110	片耳: 200,000円 両耳: 320,000円	片耳: 200,000円 両耳: 320,000円	片耳: 200,000円 両耳: 320,000円	片耳: 200,000円 両耳: 320,000円	片耳: 200,000円 両耳: 320,000円

(注1) ダイレクトストリーミングはiPhone、ASHA対応のAndroid端末のみ。
対応モデルはsRIC R D、mRIC R D、BTE R D、RIC 312 D、BTE 13 Dのみとなります。

※ プログラムボタンのないモデルのプログラム切替には、スマートフォンアプリまたは別売のリモコンが必要です。
※ 耳あな型は、耳あなの形状によって画像とは大きさが異なる場合があります。※ 耳かけ型のカスタムイヤチップ/イヤモールドは有料です。

[マグニファイ]

WIDEX MAGNIFY™

人生を楽しむ。
スマートに愉しむ。

もっと自由に、音楽やテレビを楽しく。
最新の充電式もラインナップ。

耳あな型補聴器 MAGNIFY 303AFBZX00022000 耳かけ型補聴器 MAGNIFY 303AFBZX00023000

環境の変化に対応、言葉を聞き取りやすくする機能

クラス	チャンネル数	リチウムイオン充電式	アプリ対応	自動環境適応 [サウンドクラス]	言葉を強調 [スピーチエンハンサー]	騒音制御 [語音強化]	前方の声を聞きやすく [ロケーター]
MAGNIFY 100 [M10]	6	●	●	—	—	●	●
MAGNIFY 50 [M05]	4	—	●	—	—	▲	●
MAGNIFY 30 [M03]	4	—	—	—	—	▲	—

シリーズ共通の特長

- 最新の充電式もラインナップ
- スマートフォンの通話音声や音楽を補聴器で楽しみ、アプリで操作も簡単
- ワイデックスの優れた音質をお求めやすい価格で

リチウムイオン充電式

スマホとつながる

高速演算処理
8億回/秒

トゥルーアコースティクス

全クラス
2年保証



比較的静かな場所や少人数の集まりでの使用に特におすすめです

静かなリビングでの会話	郵便局などの窓口でのやりとり	デイサービスでの会話	スーパーでの会話	街中での会話

★★★ ★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
★★★ ★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
★★★ ★★★	★	★	★	★

環境への対応力



ワイデックスの補聴器

マグニファイを支える最新技術

補聴器とスマートフォンで もっと快適、もっと便利に。

マグニファイはスマートフォンとつながることで、より便利に使いこなすことができるようになりました。電話の声を直接クリアに聞く、補聴器で音楽を楽しむ、リモコンとして使いこなす。マグニファイであなたの世界がもっと広がります。

ダイレクトストリーミング

電話の声を補聴器でクリアに聞くことができます。また、ワイヤレスイヤホンのようにスマートフォンの音楽や動画を楽しむこともできます。



アプリを使っているいろいろ

スマートフォンのアプリを使えば、補聴器を手元で簡単に操作することができます。



音量調節

消音（ミュート）も簡単にできます。



補聴器をさがす

失くしたかなという時でも安心です。



聞きたい方向

聞きたい音の方向を選べます。



お気に入りプログラム

自分の好きな音の設定を保存することができます。

個々の使用状態に合わせて より自然で快適な聞こえ方を実現する 『トゥルーアコースティクス™』。

モーメントの新機能「トゥルーアコースティクス™」をマグニファイにも搭載。補聴器の出力補正の精度をさらに高めました。



新機能「トゥルーアコースティクス™」は、一人ひとり異なる使用状況に合わせて、クリアで豊かな高音質を実現します。「初めて使う方でも満足度の高い聞こえ」を目指したワイデックスの独自技術です。

耳かけ型 [RICタイプ]

耳かけ型



聴力に応じて、
目立たない細
いチューブも
選べます。

耳かけ型 [RICタイプ]

耳かけ型



聴力に応じて、目立たない
細いチューブも選べます。

耳あな型

リチウムイオン充電式

リチウムイオン充電式



mRIC R D
[MRR2D]

軽度 中度 高度



- ・プログラムボタン付
- ・ダイレクトストリーミング (注1)

BTE R D
[MBR3D]

軽度 中度
高度 重度



- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備
- ・ダイレクトストリーミング (注1)

RIC 312 D
[MRB2D]

軽度 中度 高度
重度 HPLシーパーのみ



- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備
- ・ダイレクトストリーミング (注1)

BTE 312
[MBB2]

軽度 中度
高度



- ・プログラムボタン付

(100, 50) (30)
BTE 13 D/BTE 13
[MBB3D/MBB3]

軽度 中度
高度 重度



- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備
- ・ダイレクトストリーミング (注1) (注2)

CIC-M/CIC
[M-CIC-M/M-CIC]

80 軽度 中度
90 軽度 中度 高度



XP
[M-XP]

軽度 中度
高度



- ・テレコイル 無償オプション

※ 補聴器は非課税です。

MAGNIFY 100 [M10]	片耳: 160,000円 両耳: 270,000円	補聴器本体の価格 です。別売りの充電 器が必要です。	片耳: 160,000円 両耳: 270,000円	片耳: 160,000円 両耳: 270,000円	片耳: 160,000円 両耳: 270,000円
MAGNIFY 50 [M05]	—	・除菌乾燥充電器 33,000円 (税込)	片耳: 140,000円 両耳: 240,000円	片耳: 140,000円 両耳: 240,000円	片耳: 140,000円 両耳: 240,000円
MAGNIFY 30 [M03]	—	・スタンダード充電器 20,000円 (税込) (P31, P47参照)	—	片耳: 98,000円 両耳: 158,000円	片耳: 98,000円 両耳: 158,000円

(注1) ダイレクトストリーミングはiPhone、ASHA対応のAndroid端末のみ。対応モデルはmRIC R D、BTE R D、RIC 312 D、BTE 13 Dのみとなります。
(注2) 30クラスはBTE 13 [MBB3] となり、ダイレクトストリーミングには対応していません。

※ プログラムボタンのないモデルのプログラム切替には、スマートフォンアプリまたは別売のリモコンが必要です。
※ 耳あな型は、耳あなの形状によって画像とは大きさが異なる場合があります。※ 耳かけ型のカスタマイヤチップ/イヤモールドは有料です。

ワイテックスの補聴器

ワイテックスの補聴器

MOMENT / MAGNIFY シリーズ

※ MOMENTシリーズのみ

sRIC R D [MRR4D]



mRIC R D [MRR2D]



BTE R D [MBR3D]



RIC 10 [MRB0]

※ MOMENTシリーズのみ



MOMENT / MAGNIFY シリーズカラー名称一覧

番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称
068	パールホワイト	114	ハニーブロード	119	シルバーグレー	136	ディープブルー
076	スポーティレッド	115	チェスナットブラウン	120	ゴールドテンブラウン		
077	フレッシュピンク	116	ダークチェリー	121	チタニウムグレー		
078	エーゲブルー	118	テックブラック	123	オータムベージュ		

※ 同じカラー名称でもシリーズ/モデルにより色が異なる場合があります。

RIC 312 D [MRB2D]



BTE 312 [MBB2]




BTE 13 D / BTE13 [MBB3D / MBB3]



耳に合わせてつくるから、ぴったりフィット。 カスタムイヤチップ 12,000円～ イヤモールド 10,000円～
 耳かけ型には、カスタムイヤチップ・イヤモールドがおすすめです。

※ P76-78参照

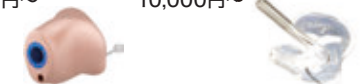

ワイテックスの補聴器

[イヴォーク] WIDEX EVOKE™

自ら考え、学び、成長する。

毎日の生活からAIがあなたの音の好みを学習。
例えば使うほど聞きやすくなるAI補聴器。イヴォーク。

耳あな型補聴器 EVOKE 230AFBZX00077000 耳かけ型補聴器 EVOKE 230AFBZX00050000

環境の変化に対応、言葉を聞き取りやすくする機能

クラス	AI機能	チャンネル数	保証	自動環境適応 [サウンド クラス]	言葉を強調 [スピーチ エンハンサー]	騒音制御 [語音強化]	前方の声を 聞きやすく [ロケーター]
EVOKE 440	●	15	プレミアムサービス 3年+紛失補償	11 シーン	● リアルタイム	●	●
EVOKE 330	●	12	プレミアムサービス 2年+紛失補償	7 シーン	●	●	●
EVOKE 220	●	10	2年	4 シーン	—	●	●
EVOKE 110	—	6	2年	3 シーン	—	●	▲

シリーズ共通の特長

- 補聴器にAI機能を初めて搭載することで、ユーザーの好みまで反映
- スマートフォンの通話音声や音楽を補聴器で楽しみ、アプリで操作も簡単
- 環境の変化にも素早く柔軟に対応、いつでもどこでも快適に



スマホとつながる

高速演算処理
8億回/秒

AI機能

自動環境適応
サウンドクラス

騒がしい場所や人が大勢集まる場面での使用に特におすすめです

静かな場所での会話 少人数の集まり	複数の人が発言する会議	にぎわっているレストランでの会話	人ごみや交通量の多い屋外での会話	移動する電車やバスの中での会話

★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

環境への対応力



ワイテックスの補聴器

イヴォークを支える最新技術

自ら考え、学び、成長するAI機能で、あなたにぴったりの音を。

イヴォークは初めてのAI搭載補聴器として登場しました。
補聴器が自ら考えあなたの好みを覚えていく。
今いる場面や好みに合わせてあなたの聞きたい音を届けます。

サウンドセンス ラーン その場で簡単、好みの聞こえ方に

「もっと聞こえやすくしたい」と思ったらスマホのアプリを起動して、アプリが提案する音から好みのものを選んでいくだけで、簡単に聞こえ方を調整できます。



サウンドセンス アダプト 使うほどに、聞きやすく快適

あなたがどのような環境でどのような操作をしたのかをAIが学習し、使い続けるほど、環境に合わせた好みの聞こえ方へと自動で調整。あなた好みの補聴器に成長していきます。



搭載器種は P86-87参照

サウンドクラス いつでもどこでも、自動で最適に

あなたの周囲の環境を常に分析。自動で、その場に合った音質へスムーズに切り替えます。例えば、静かな店内から騒がしい街中へ移動した時も、音量や音のバランスが自動で調整され、最適な音を届けます。

補聴器があなたのいる場所を認識・分析し、その場で聞きやすい音に自動で切り替え



搭載器種は P86-87参照

耳かけ型 [RICタイプ]

耳かけ型



聴力に応じて、目立たない細いチューブも選べます。(FPを除く)

耳あな型



RIC 10
[ERBO]

軽度 中度

PR536
(10A)



F2
[E-F2]

軽度 中度 高度
重度 HPLシーバーのみ

Bluetooth PR41
(312)

- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備
- ・ダイレクト
- ・ストリーミング (注1)



FM
[E-FM]

軽度 中度
高度

PR41
(312)

- ・プログラムボタン付



FA
[E-FA]

軽度 中度
高度

PR41
(312)

- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備



BTE 13 D
[EBB3D]

軽度 中度
高度 重度

Bluetooth PR48
(13)

- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備
- ・ダイレクト
- ・ストリーミング (注1)



FP
[E-FP]

中度 高度
重度

PR48
(13)

- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備



CIC-M/CIC
[E-CIC-M/E-CIC]

80 軽度 中度
90 軽度 中度 高度

PR536
(10A)



XP
[E-XP]

軽度 中度
高度

PR41
(312)

- ・テレコイル
- 無償オプション



IM/IP
[E-IM/E-IP]

軽度 中度
高度 IPのみ

PR41
(312)

- ・ボリュームコントロール
- 有償オプション (片耳: 10,000円)
- ・プログラムボタン
- 無償オプション

※ 補聴器は非課税です。

EVOKE 440	片耳: 540,000円 両耳: 960,000円	片耳: 540,000円 両耳: 960,000円	片耳: 540,000円 両耳: 960,000円	片耳: 550,000円 両耳: 980,000円
EVOKE 330	片耳: 350,000円 両耳: 630,000円	片耳: 350,000円 両耳: 630,000円	片耳: 350,000円 両耳: 630,000円	片耳: 360,000円 両耳: 650,000円
EVOKE 220	片耳: 240,000円 両耳: 430,000円	片耳: 240,000円 両耳: 430,000円	片耳: 240,000円 両耳: 430,000円	片耳: 250,000円 両耳: 450,000円
EVOKE 110	片耳: 170,000円 両耳: 310,000円	片耳: 170,000円 両耳: 310,000円	片耳: 170,000円 両耳: 310,000円	片耳: 180,000円 両耳: 330,000円

(注1) ダイレクトストリーミングはiPhoneのみ。対応モデルはF2、BTE 13 Dのみとなります。

※プログラムボタンのないモデルのプログラム切替には、スマートフォンアプリまたは別売のリモコンが必要です。

※耳あな型は、耳あなの形状によって画像とは大きさが異なる場合があります。※耳かけ型のカスタマイヤチップ/イヤモールドは有料です。

ワイテックスの補聴器

ワイテックスの補聴器



補聴器をもっと身近に。

搭載機能を絞り込むことでお求めやすい価格を実現。

耳あな型補聴器 ENJOY 301AFBZX00041000 耳かけ型補聴器 ENJOY 301AFBZX00042000

シリーズ 共通の特長	共通の特長			静かなリビングでの会話	郵便局などの窓口でのやりとり	デイサービスでの会話	
	スマホアプリ	高速演算処理 8億回/秒	全クラス 2年保証	チャンネル数	アプリ対応	騒音制御 語音強化	前方の声を聞きやすく [ロケーター]
ENJOY 100 [E10]	6	●	●	▲	★★★★	★★★	★★★
ENJOY 50 [E05]	4	●	▲	▲	★★★★	★	★
ENJOY 30 [E03]	4	—	▲	—	★★★★	★	—

耳かけ型 [RICタイプ]

耳かけ型

聴力に応じて、目立たない細いチューブも選べます。(FPを除く)

耳あな型



FS

軽度 中度 高度 重度 HPLシーパーのみ

PR41 (312)

- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備



FM

軽度 中度 高度

PR41 (312)

- ・プログラムボタン付



FA

軽度 中度 高度

PR41 (312)

- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備



FP

中度 高度 重度

PR48 (13)

- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備



XP

軽度 中度 高度

PR41 (312)

- ・テレコイル無償オプション

※ 補聴器は非課税です。

シリーズ	片耳	両耳	片耳	両耳	片耳	両耳	片耳	両耳
ENJOY 100 [E10]	140,000円	250,000円	140,000円	250,000円	140,000円	250,000円	150,000円	270,000円
ENJOY 50 [E05]	120,000円	220,000円	120,000円	220,000円	120,000円	220,000円	130,000円	240,000円
ENJOY 30 [E03]	—	—	85,000円	140,000円	85,000円	140,000円	—	—

※ XPのプログラム切替にはスマートフォンアプリまたは別売のリモコンが必要です。

※ 耳あな型は耳あなの形状によって画像とは大きさが異なる場合があります。※ 耳かけ型のイヤチップ/イヤモールドは有料です。

ワイテックスの補聴器

EVOKE / ENJOY シリーズ

RIC 10 [ERBO]

※ EVOKEシリーズのみ



F2 [FUSION2]

※ EVOKEシリーズのみ



FM [FASHION MINI]



FA [FASHION]



BTE 13 D [EBB3D]

※ EVOKEシリーズのみ



FP [FASHION POWER]



FS [FUSION]

※ ENJOYシリーズのみ



EVOKE / ENJOY シリーズカラー名称一覧

番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称
021	ウォームベージュ	075	ライムグリーン	081	ナチュラルベージュ	123	オータムベージュ
068	パールホワイト	076	スポーティレッド	118	テックブラック	136	ディープブルー
069	プラチナゴールド	077	フレッシュピンク	119	シルバークレー		
071	カプチーノブラウン	078	エーゲブルー	121	チタニウムグレー		


※ 同じカラー名称でもシリーズ/モデルにより色が異なる場合があります。

ワイテックスの補聴器

ワイテックスの補聴器

耳に合わせてつくるから、ぴったりフィット。 □ カスタムイヤチップ 12,000円～ □ イヤモールド 10,000円～
耳かけ型には、カスタムイヤチップ・イヤモールドがおすすめです。

※P76-78参照

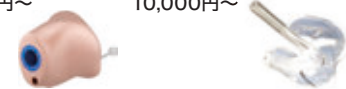

[ユニーク]

WIDEX UNIQUE™

いつでも多彩で豊かな音を。

ユニークは、補聴器による聞こえの限界を広げました。あなたがどこで何をしても、常に周りの環境とあなたの聞こえ方に合った豊かな音を届け続けます。

耳あな型補聴器 UNIQUE 227AFBZX00097000 耳かけ型補聴器 UNIQUE 227AFBZX00098000

シリーズ共通の特長

高速演算処理
6億回/秒

自動環境適応
サウンドクラス

クラス	チャンネル数	保証	自動環境適応 [サウンドクラス]	言葉を強調 [スピーチエンハンサー]	騒音制御	前方の声を聞きやすく [ロケーター]
UNIQUE 440	15	プレミアムサービス 3年+紛失補償	9シーン	● リアルタイム	●	●
UNIQUE 330	10	2年	5シーン	●	●	●
UNIQUE 220	6	2年	3シーン	—	● SIS	●
UNIQUE 110	4	2年	1シーン	—	●	▲

耳かけ型 [RICタイプ]

耳かけ型



聴力に応じて、目立たない細かいチューブも選べます。(FPを除く)

耳あな型

※補聴器は非課税です。



PA
[U-PA]

軽度 中度

FS
[U-FS]

軽度 中度 高度

重度 HPLシーバーのみ

- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備

FM
[U-FM]

軽度 中度 高度

- ・プログラムボタン付

FA
[U-FA]

軽度 中度 高度

- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備



FP
[U-FP]

中度 高度 重度

- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備



CIC-M/CIC
[U-CIC-M/U-CIC]

80 軽度 中度

90 軽度 中度 高度



XP
[U-XP]

軽度 中度 高度

- ・テレコイル無償オプション



IM/IP
[U-IM/U-IP]

軽度 中度 高度

IPのみ

- ・ボリュームコントロール有償オプション (片耳:10,000円)
- ・プログラムボタン無償オプション

UNIQUE 440	片耳: 480,000円 両耳: 860,000円	片耳: 470,000円 両耳: 840,000円	片耳: 470,000円 両耳: 840,000円	片耳: 490,000円 両耳: 880,000円
UNIQUE 330	片耳: 300,000円 両耳: 530,000円	片耳: 290,000円 両耳: 510,000円	片耳: 290,000円 両耳: 510,000円	片耳: 310,000円 両耳: 550,000円
UNIQUE 220	片耳: 200,000円 両耳: 350,000円	片耳: 190,000円 両耳: 330,000円	片耳: 190,000円 両耳: 330,000円	片耳: 210,000円 両耳: 370,000円
UNIQUE 110	片耳: 140,000円 両耳: 250,000円	片耳: 130,000円 両耳: 230,000円	片耳: 130,000円 両耳: 230,000円	片耳: 150,000円 両耳: 270,000円

※プログラムボタンのないモデルのプログラム切替には、別売のリモコンが必要です。


※耳あな型は、耳あなの形状によって画像とは大きさが異なる場合があります。※耳かけ型のカスタムイヤチップ/イヤモールドは有料です。

ワイテックスの補聴器

ワイテックスの補聴器

UNIQUE シリーズ

PA [PASSION]

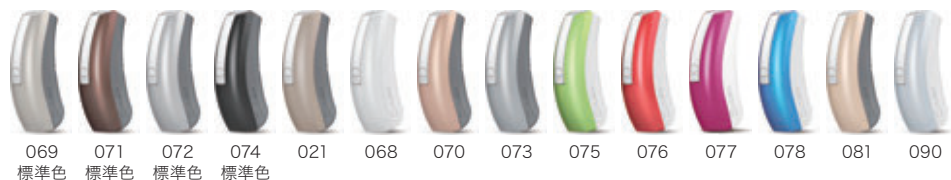

069 標準色 071 標準色 072 標準色 074 標準色 021 068 070 073 075 076 077 078 081 090

FS [FUSION]



069 標準色 071 標準色 072 標準色 074 標準色 021 068 070 073 075 076 077



078 081 090

FM [FASHION MINI]



069 標準色 071 標準色 072 標準色 074 標準色 021 068 070 073 081

FA [FASHION]



069 標準色 071 標準色 072 標準色 074 標準色 021 068 070 073 075



076 077 078 081 090

FP [FASHION POWER]



069 標準色 071 標準色 072 標準色 074 標準色 021 068 070 073 081


UNIQUE シリーズカラー名称一覧

番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称
021	ウォームベージュ	071	カプチーノブラウン	075	ライムグリーン	081	ナチュラルベージュ
068	パールホワイト	072	クリスタルシルバー	076	スポーティレッド	090	メタリックブルー
069	プラチナゴールド	073	チタングレー	077	フレッシュピンク		
070	コパーブラウン	074	リアルブラック	078	エーゲブルー		

※ 同じカラー名称でもシリーズ/モデルにより色が異なる場合があります。

耳に合わせてつくるから、ぴったりフィット。 □ カスタムイヤチップ 12,000円～ □ イヤモールド 10,000円～
耳かけ型には、カスタムイヤチップ・イヤモールドがおすすめです。

※ P76-78参照

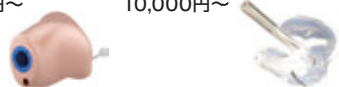

ワイテックスの補聴器

重度難聴の方向け

[メニュースーパーパワー] MENU SUPER POWER

多彩な機能、生活防水を備えたハイパワーモデル。

耳かけ型 [ハイパワータイプ]

耳かけ型補聴器 MENU SUPER 228AFBZX00006000

クラス	チャンネル数	言葉を強調 [スピーチ エンハンサー]	価格
ME10-SP	10	●	片耳: 250,000円 両耳: 450,000円
ME5-SP	5	—	片耳: 140,000円 両耳: 250,000円
ME3-SP	3	—	片耳: 98,000円 両耳: 180,000円

※ 補聴器は非課税です。

カラーバリエーション



021 標準色 022 009 011 013

番号	カラー名称	番号	カラー名称
009	キャンディーブルー	021	ウォームベージュ
011	キャンディースモーク	022	ブラウン
013	キャンディーレッド		

※ 同じカラー名称でもシリーズ/モデルにより色が異なる場合があります。
※ キャンディカラーのケース形状はME-SPとは異なります。

MENU専用リモコン

RC4-1
シンプルな機能で
操作が簡単

RC4-2
多彩な機能を
搭載



各**22,000円** (税込)

耳に合わせてつくるから、
ぴったりフィット。
耳かけ型には、
イヤモールドがおすすめです。

イヤモールド
10,000円~



※ P78参照

総合支援法について

障害者総合支援法には、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器などの補装具の費用が支給される制度があります。

身体障害者障害程度等級表 (障害等級 身体障害者福祉法抜粋)

級別	障害の状態
2級	両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均100デシベル以上」のもの (両耳全ろう)
3級	両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均90デシベル以上」のもの (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級	1. 両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均80デシベル以上」のもの (耳介に接しなければ話言葉を理解し得ないもの) 2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの
5級	高度難聴用
6級	1. 両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均70デシベル以上」のもの (40cm以上の距離で発声された会話を理解し得ないもの) 2. 一側耳の聴力レベルが「平均90デシベル以上」、他側耳の聴力レベルが「平均50デシベル以上」のもの

ワイデックスの総合支援法対応補聴器


高度難聴用耳かけ型: E-FM E05G / E-FA E05G / E-FP E05G

重度難聴用耳かけ型: ME5-SPG

※ 専用の総合支援法補聴器カタログをご用意しております。取扱店にお問い合わせください。

! 国の支援制度があります。

聞こえの程度によっては、国の支援制度が利用できるケースがあります。ただし、手続きは市区町村によって異なる場合がありますので、お住まいの市区町村の「福祉課窓口」にお問い合わせください。また、補聴器の購入費用が医療費控除の対象となりました。手続き等については補聴器購入前に税務署にお問い合わせください。

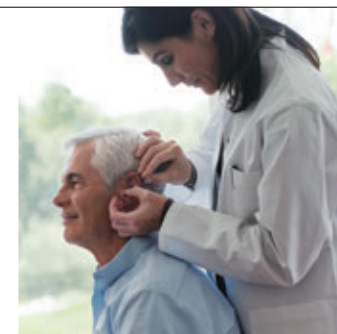

聞こえにくい側の耳に着ける送信器

WIDEX CROS [クロス]

左右両方からの音を聞くことができます。

片側の耳が聞こえない方は、生活上の大切な音を聞き逃している可能性があります。片側の耳が全く聞こえない（一側聾）、あるいはほとんど聞こえない方でもWIDEX CROSを使えば、聞こえにくい耳側の音を、聞こえる耳に届けることができます。

WIDEX CROS [クロス] とは？

聞こえにくい側の耳に、送信器 (WIDEX CROS) を、聞こえる側の耳に、対応する補聴器を装着して使うことで、送信器が拾った音を、無線通信により、瞬時に補聴器に届けるシステムです。今まで、聞こえにくかった音に気づくことができるようになり、会話もより聴き取りやすくなります。そして、なにより左右両方からの音を楽しむことができるようになります。



聞こえにくい側の耳に着ける送信器

WIDEX CROS

99,000円 (税込)

生活防水 IP57 PR41 (312)

- ・電池寿命は約150時間 (FAは約120時間)
- ・オープンイヤチップで長時間の装用もらくらく
- ・軽くて目立たないデザイン
- ・1年保証
- ・豊富なカラーバリエーション



FSモデル

FAモデル

WIDEX CROS (送信器) は、補聴器と組み合わせて使います。

※ MOMENT、EVOKE、UNIQUE、MAGNIFY、ENJOYシリーズに対応。
ダイレクトストリーミング対応モデル及び、CIC-M、30クラスはCROS非対応です。P88-89を参照ください。

FA [FASHION]

EVOKE カラー



069 標準色 071 標準色 118 標準色 119 標準色 068 076 081 121 123 136

UNIQUE カラー



069 標準色 071 標準色 072 標準色 074 標準色 021 068 070 073 075 076



077 078 081 090

FS [FUSION]



069 標準色 071 標準色 072 標準色 074 標準色 021 068 070 073 075 076 077 078 081 090

WIDEX CROS シリーズカラー名称一覧

番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称
021	ウォームベージュ	072	クリスタルシルバー	077	フレッシュピンク	119	シルバーグレー
068	パールホワイト	073	チタングレー	078	エーゲブルー	121	チタニウムグレー
069	プラチナゴールド	074	リアルブラック	081	ナチュラルベージュ	123	オートムベージュ
070	コパーブラウン	075	ライムグリーン	090	メタリックブルー	136	ディープブルー
071	カプチーノブラウン	076	スポーティレッド	118	テックブラック		

※ 同じカラー名称でもシリーズ/モデルにより色が異なる場合があります。

アクセサリ


アクセサリ

聴力や装着感によってレシーバーやイヤチップを選択できます。[ワイデックス フレックス]

※補聴器本体の形状によって、組み合わせられるパーツの種類が異なります。

オーダーメイドイヤチップ/イヤモールドについて

- 耳あなの形に合わせて作成するので、耳にぴったりフィットしてずれにくい。
- 自分でいつも同じ位置につけられるので、聞こえ方が安定します。
- 耳あなの形状や使用するレシーバー、装着感などによって対応するタイプが変わります。

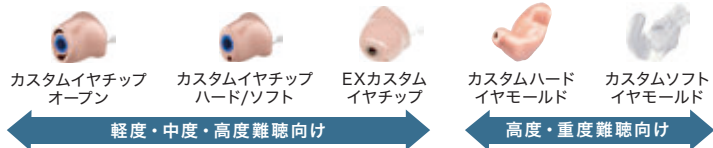

既製イヤチップについて

種類とサイズが豊富で聴力や装着感に応じて選ぶことができます。



RICタイプ モデル	対応するイヤワイヤ+レシーバー (税込)	オーダーメイドイヤチップ/イヤモールド (非課税)	既製イヤチップ (税込)
sRIC R D/mRIC R D	<ul style="list-style-type: none"> ■ V.2 EW イヤワイヤ付 Mレシーバー 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4 各13,200円 ■ V.2専用イーチップロック 220円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ V.2 EW カスタム Mレシーバーイヤチップ ハード/ソフト (注2) /オープン ■ V.2 EW EX カスタム Mレシーバーイヤチップ 各12,000円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EW オープン イヤチップ: XS・S・L ■ EW オープン・ラウンド イヤチップ: S・M・L ■ EW チューリップ イヤチップ: M・L ■ EW ラウンド イヤチップ: S・M・L
RIC 10/PA/RIC 312 D/F2/FS	<ul style="list-style-type: none"> ■ EW イヤワイヤ付 Sレシーバー ■ EW イヤワイヤ付 Mレシーバー 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4 各13,200円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EW カスタム Sレシーバー/Mレシーバーイヤチップ ハード/ソフト (注2) /オープン ■ EW EX カスタム Sレシーバー/Mレシーバーイヤチップ 各12,000円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EW スリープ・ベント イヤチップ: XS・S・M・L ■ EW ダブルドーム イヤチップ: XS・S・M・L ■ EW スリープ・パワー イヤチップ: XS・S・M・L 各330円
sRIC R D/mRIC R D	<ul style="list-style-type: none"> ■ V.2 EW イヤワイヤ付 Pレシーバー 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4 各13,200円 ■ V.2専用イーチップロック 220円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ V.2 EW カスタム Pレシーバーイヤチップ ハード/ソフト (注2) ■ V.2 EW EX カスタム Pレシーバーイヤチップ 各12,000円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EW チューリップ イヤチップ: M・L ■ EW ラウンド イヤチップ: S・M・L ■ EW スリープ・ベント イヤチップ: XS・S・M・L ■ EW ダブルドーム イヤチップ: XS・S・M・L ■ EW スリープ・パワー イヤチップ: XS・S・M・L 各330円
RIC 312 D/F2/FS	<ul style="list-style-type: none"> ■ EW イヤワイヤ付 Pレシーバー 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4 各13,200円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EW カスタム Pレシーバーイヤチップ ハード/ソフト (注2) ■ EW EX カスタム Pレシーバーイヤチップ 各12,000円 	-
	<ul style="list-style-type: none"> ■ イヤワイヤRITE 左右共通 長さ:-2・-1・0・1・2・3・4・5 各4,400円 ■ HPLレシーバー 8,800円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ カスタムHPハード イヤモールド 標準型/拡張型 各15,000円 	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ イヤワイヤ付 HPLレシーバー 左右共通 長さ:0・1・2・3・4・5 各13,200円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ カスタムHPソフト イヤモールド (注2) 15,000円 	-
耳かけ型 モデル	対応するフック&チューブ (税込)	オーダーメイドイヤチップ/イヤモールド (非課税)	既製イヤチップ (税込)
BTE 312/FM/FA	<ul style="list-style-type: none"> ■ EW フック&チューブ (0.9mm/1.4mm) 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4 各550円 ■ イーチップロック 110円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EW カスタムイヤチップ/V.2 EWカスタムイヤチップ ハード/ソフト (注2) /オープン ■ EW EX カスタムイヤチップ/V.2 EW EX カスタムイヤチップ 各12,000円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EW オープン イヤチップ: XS・S・L ■ EW オープン・ラウンド イヤチップ: S・M・L ■ EW チューリップ イヤチップ: M・L ■ EW ラウンド イヤチップ: S・M・L ■ EW スリープ・ベント イヤチップ: XS・S・M・L ■ EW ダブルドーム イヤチップ: XS・S・M・L ■ EW スリープ・パワー イヤチップ: XS・S・M・L 各330円
BTE R D/BTE 13 D/BTE 13	<ul style="list-style-type: none"> ■ V.2 EW フック&チューブ (0.9mm/1.4mm) 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4 各770円 ■ V.2専用イーチップロック 220円 ■ アダプター V.2 EWフック&チューブ用 330円 		
BTE 312/FM/FA/ BTE R D/BTE 13 D/BTE 13	<ul style="list-style-type: none"> ■ ノーマルフック (BTE 312・FM・FA用/BTE R D・BTE 13D・BTE 13用) 各660円 ■ チューブ:V3 (曲がり) (注3) 132円 		

(注1) ラウンドイヤチップは2ベントのみとなります。(注2) ソフトタイプには8色のカラーバリエーションがあります。P78を参照ください。ハードタイプはベージュのみです。(注3) イヤモールド使用時は、チューブはイヤモールドに付属します。

※ イヤモールドは聴力にあわせてさまざまな材質、形状よりお選びいただけます。※ カスタムイヤチップ、イヤモールドは、耳あなの形状によっては製作できない場合があります。※ 別売パーツは税込価格ですが、例外としてイヤモールド (カスタムイヤチップを含む) は非課税です。※ EW/V.2EWフック&チューブについては、EW非対応の旧製品との組み合わせでは使用できません。※ レシーバーとカスタムレシーバーイヤチップについては、EW (EASYWEAR) 対応製品と非対応の旧製品の組み合わせでは使用できません。

カスタムイヤチップ・イヤモールド

耳に合わせて型をとって作製するため、快適にフィットするだけでなく、音漏れによるハウリングを軽減するのに効果的です。詳しくは取扱店にご相談ください。

カスタムソフトイヤチップ/ カスタムソフトイヤモールド

対応モデル：RICタイプ、フック&チューブ仕様時の耳かけ型

カスタムソフトイヤチップ：12,000円（非課税）

カスタムソフトイヤモールド：15,000円（非課税）



耳かけ型用イヤモールド（価格は非課税）

形状	アクリル		シリコン 40/70 10,000円
	ハード 10,000円	ソフト 10,000円 スーパーソフト 12,000円	
スタンダード	○	○	○
セミカナル	—	○	—
カナル	○	○	○
ミニカナル	○	—	○
スケルトン	○	—	—
カラー	□ クリア □ クリアピンク □ ベージュ	□ クリア □ ピンク □ ベージュ □ レッド □ ブルー	□ クリア □ クリアピンク □ ベージュ □ レッド □ ブルー

※ シリコンの40は70に比べて柔らかく、装着時の圧迫感が少なくなりますが、耐用年数が短くなります。

大切な補聴器を快適に

中にスタンダード
充電器が入ります。



dry-cap uv 2⁺ ドライキャップ ユービー 2⁺

8,800円（税込）

充電しながら乾燥とUV-Cライトでの除菌ができる充電式補聴器に最適。乾燥剤も不要。乾燥・除菌が終われば自動で停止します。

- サイズ：幅120mm×奥行120mm×高さ120mm
- 本体重量：315g
- 動作時間：120分（ドライ&クリーンモード）/
2分（クリーンモード）
- 電源：ACアダプタまたはUSB接続 ● 2年保証



ワイデックス補聴器用乾燥ケース（乾燥剤入り）

880円（税込）

簡易乾燥ケース。ケースに入れる際は、取り出した電池を蓋の磁石シートに置いて使用します。青い粒の色が赤みをおびてきたら詰め替え用乾燥剤（別売）に交換してください。

詰め替え用乾燥剤（1袋）

165円（税込）

PerfectDry Lux パーフェクトドライ ラックス

9,900円（税込）

乾燥と360°UV-Cライトでの除菌が同時にできる乾燥剤不要の電気乾燥器。ボタンを押せば自動運転、45分で乾燥と除菌が完了します。

- サイズ：幅92mm×奥行72mm×高さ47mm
- 本体重量：160g ● 乾燥時間：45分
- 電源：ACアダプタまたはUSB接続 ● 3年保証



スーパードライアイド（磁石シート付）

2,750円（税込）

補聴器の大敵である湿気を強力に除去する除湿剤。

磁石シート

220円（税込）

蓋の外面に貼って電池の紛失を防ぎます。

毎日のお掃除とお手入れで 補聴器を快適に使いましょう



補聴器掃除用ブラシ

264円 (税込)

机の上に置いて音の出口を下に向けブラッシングするので、耳あかが補聴器内部に入りにくくなっています。蓄光機能付きです。



エアブローワー

1,100円 (税込)

イヤフォームやチューブの内部に付着した水滴や異物を空気を吹きつけて取り除きます。洗浄した後などに使用します。



イヤフォームクリーナー (約118ml)

1,650円 (税込)

柔らかい布などに少量吹きかけ軽く拭くだけで汚れが取れます。イヤフォームや耳あな型補聴器にお使いください。



ナノケアワックスガード
(ケース:白・8本入り)

990円 (税込)

セルストップワックスガード
(ケース:グレー・8本入り)

770円 (税込)

補聴器の音口に装着、耳あかの侵入を防ぎます。ナノケアには、強い撥水撥油性があります。セルストップにはカスタムハード(ソフト)イヤフォーム用のXLもあります。

欠かせない必需品と あると便利なアクセサリ



ワイデックス電池 (6ヶ入り・1パック)

各1,320円 (税込)

品質の安定している補聴器専用空気電池。PR536 (10A)、PR41 (312)、PR48 (13)、PR44 (675) の4種類。



ワイデックス電池チェッカー

825円 (税込)

電池の残量を液晶で表示します。リチウムイオン充電式を除く全ての補聴器用電池が計測できます。予備電池用ホルダー付き。



補聴器サスペンダークリップ

1,650円 (税込)

耳かけ型補聴器固定用具。クリップ部分を洋服などに着けることで補聴器の落下防止に効果があります。補聴器の大きさに合わせて3種類のサイズ(S、M、L)があります。片耳装用の場合はゴム紐の片方をカットして使用します。

- Sサイズ: RIC 10/PAモデル用
- Mサイズ: sRIC R D/mRIC R D/RIC 312 D/FS/F2/FM/BTE 312/FAモデル用
- Lサイズ: BTE R D/BTE 13 D/BTE 13/FP/SPモデル用



イヤチップ/耳せんジョイント

① 各275円 (税込)

イヤチップ (耳せん)
SS/S/M/MM/Lサイズ

② 132円 (税込)
V3 (曲がり)

多彩な周辺機器との組み合わせで、 補聴器の活躍シーンはもっと広がります



テレビの音量を気にせず
家族と一緒に思い切り楽しめる。
テレビの音を直接補聴器に届けてく
れます。

リニューアル
デザイン



TV PLAY テレビ プレイ

44,000円 (税込)

世界の有名美術館等で採用されている、デンマークのテキスタイルメーカー、Kvadrat (クヴァドラ) の生地を使用したおしゃれで現代的なデザイン。簡単操作で迫力あるサウンドを楽しめます。

- 電源：テレビのUSB端子と接続
- 1年保証



TV-DEX テレビ デックス

44,000円 (税込)

テレビやオーディオ機器と無線でつながり、伝送遅れの少ない高品質なステレオ音声を補聴器で楽しめます。

- コントローラー：充電機内蔵
- 連続使用時間：約10時間 ● 1年保証



リモコンで
らくらく操作。

RC-DEX アールシー デックス

22,000円 (税込)

音量調節やプログラム切替が簡単にできる、便利なリモコンです。

- コイン型リチウム電池 (CR2032) 使用
- 電池寿命：約12ヶ月
- 1年保証



携帯電話・スマートフォンを
もっと快適に。

COM-DEX コム デックス

33,000円 (税込)

Bluetooth対応の携帯電話で使用でき、スマホのアプリで音量調節やプログラム切り替えができます。

- 充電機内蔵
- 連続使用時間：約8時間 (ストリーミング時)、約8日間 (待受時)
- 1年保証



習い事や教室で
聞きたい声をキャッチ。

FM+DEX エフエムプラス デックス

33,000円 (税込)

FM受信器やテレコイルからの音声信号を無線対応の補聴器でストリーミング再生します。

- 充電機内蔵
- 連続使用時間：約10時間
- 1年保証







※ FM送信機・受信機は別売です。


※ 対応モデルについてはP88-89を参照ください。

※ アクセサリー使用時は、補聴器の電池寿命が通常使用時に比べ短くなります。※ 携帯電話・スマートフォンの仕様によっては、Bluetooth接続やアプリの操作ができないことがあります。※ 周囲の電波環境によっては、周辺機器との通信及びアプリの動作が影響を受けることがあります。



耳かけ型 [RICタイプ]

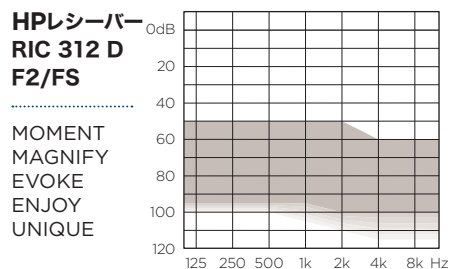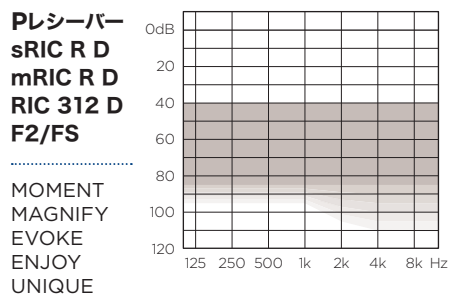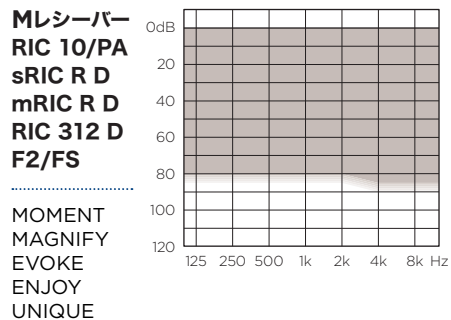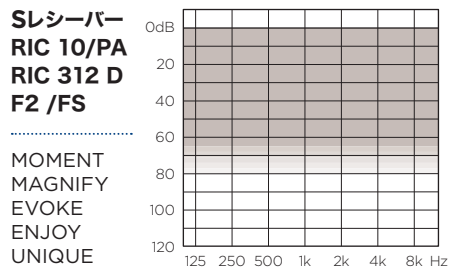




耳かけ型

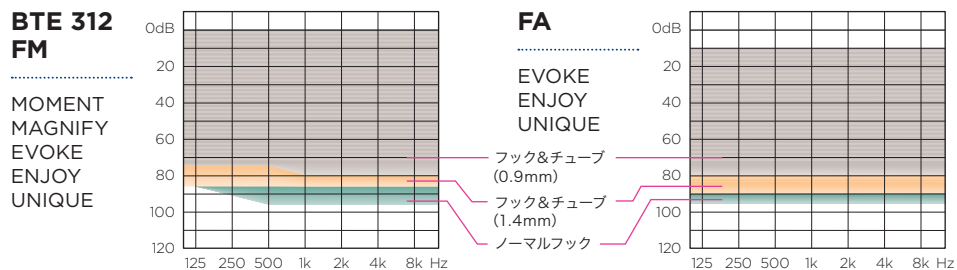

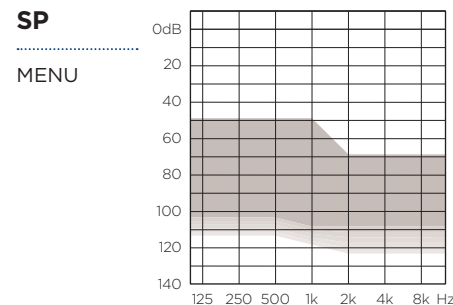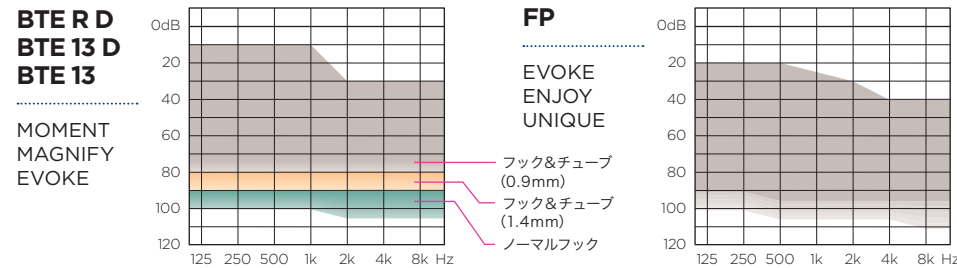

耳かけ型

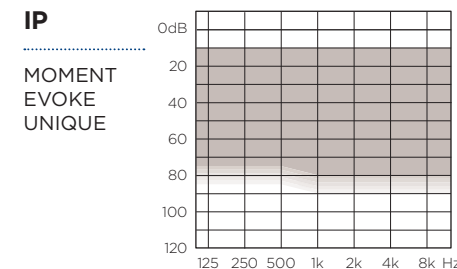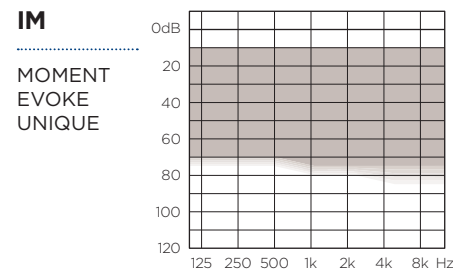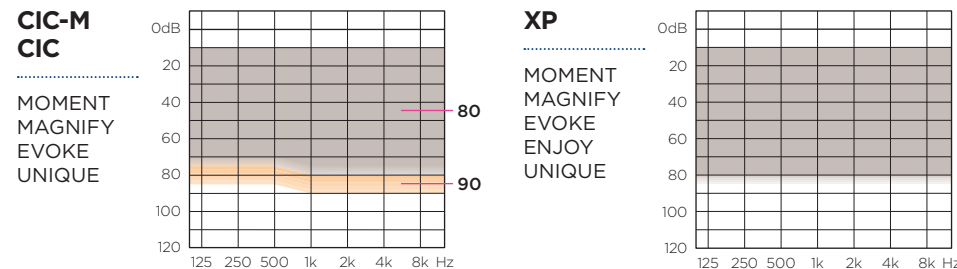

耳あな型



シリーズ・クラス別 搭載機能一覧

機能名称	説明	MOMENT				EVOKE				UNIQUE				MAGNIFY			ENJOY			MENU SP		
		440	330	220	110	440	330	220	110	440	330	220	110	100	50	30	100	50	30	10	5	3
ピュアサウンド™	補聴器からの増幅音と、補聴器を介さない原音との到達タイムラグを減らし、ストレスの少ない自然で快適な聞こえを実現します。耳あな型、P、HPLシーバーは非対応。	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トゥルーアコースティクス™	音のひずみを高度な演算によって自動補正し、高音から低音まで快適な聞こえを実現します。	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
[AI機能] マイサウンド	世界中のワイデックスユーザーの音質設定を蓄積したビッグデータを元に、その場に合わせた最適な音質設定を提案します。モデル名末尾がDのモデルのみ。	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[AI機能] サウンドセンス ラーン	専用アプリで提示される音から聞きやすい音を選ぶだけで自分好みの音にカスタマイズすることができます。モデル名末尾がDのモデル/F2のみ。	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[AI機能] サウンドセンス アダプト	補聴器が使用者の音の好みを学習し、自動で聞きやすい音に調整してくれます。MOMENTを除くCIC-Mは非対応。	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リチウムイオン充電式補聴器	電池交換の手間が必要がなく、充電器にセットするだけで簡単に充電できます。夜間に充電しておくとし翌日1日しっかり使えます。sRIC R D/mRIC R D/BTE R Dのみ。	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スマートフォンとの連携	スマートフォンでの通話を直接補聴器で聞けたり、動画や音楽を楽しんだりできます。アプリを使えばスマートフォンがリモコンになります。(P90-91の対応表参照)	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—
サウンドクラス シーン数 	あらゆる環境下で音の変化を常に分析し、自動的により快適な聞こえを作り出します。シーン数が多いほどよりその場に合った聞こえを作り出せます。	11	7	4	3	11	7	4	3	9	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チャンネル数	低音域から高音域までの音をいくつに分割処理しているかを示しています。	15	12	10	6	15	12	10	6	15	10	6	4	6	4	4	6	4	4	10	5	3
トゥルー インพุット テクノロジー 	入力音の限界値を113dBまで拡張。劣化の少ない音質、音声情報を維持します。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
リアルタイム スピーチエンハンサー 	個々のユーザーの聴力レベルと周囲の環境に合わせて、さまざまな環境で言葉をより明瞭に聴き取りやすくしてくれます。	●	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スピーチエンハンサー 	個々のユーザーの聴力レベルと周囲の環境に合わせて、言葉を聴き取りやすくしてくれます。	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
騒音制御・SIS語音強化システム 	言葉と騒音が混在している環境下で、騒音を抑えつつ言葉を強調して伝えてくれます。UNIQUE440、330には、SIS付き騒音制御は非搭載、UNIQUE110には騒音制御のみでSIS無し。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
メリハリプログラム 	周囲の音を抑えて、言葉だけを際立たせるプログラムです。会話をしっかり聞きたい時に適しています。	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ソフトレベル 騒音抑制 	エアコンや換気扇の音といった、小さくわずらわしい音を抑えて、言葉をより聴き取りやすくしてくれます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
スマートウィンド マネージャー (風雑音 減衰) 	風切り音だけを軽減し、言葉を聴き取りやすくしてくれます。CIC/CIC-Mには非搭載。	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ロケーター 	周囲の環境に合わせて、マイクが音を拾う範囲を自動的に調整します。音の出所が分かりやすくなります。CIC/CIC-Mには非搭載。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—
新変速コンプレッション 	音の大きさの変化に素早く対応し、聞こえを最適化します。UNIQUEには変速コンプレッション搭載。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トゥルーサウンド ソフトナー 	食器がぶつかる音などの衝撃音を和らげます。	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トゥルーサウンドAOC 	音の出力時に発生するひずみを事前に検知し抑えます。	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DEXリモコン対応 	テレビや携帯電話などの音声を補聴器から直接聞くことのできるタイプや、音量調節やプログラム切替ができるタイプがあります。CIC-Mは非対応。(P82-83、P88-89参照)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
インターイヤー 	左右の補聴器が連携して働き、聞こえを向上させます。CIC-Mは非対応。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—

データ

データ

シリーズ・クラス別 搭載機能一覧

機能名称	説明	MOMENT				EVOKE				UNIQUE				MAGNIFY			ENJOY			MENU SP		
		440	330	220	110	440	330	220	110	440	330	220	110	100	50	30	100	50	30	10	5	3
高音域 強調	高い周波数の音を強調することで、音楽や自然の音を豊かにしてくれます。	●	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタル ピナ	人間の耳介のように動き、音のする方向の特定を容易にします。耳あな型には非搭載。	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オーディオリティ エクステンダー	音量を大きくしても聞こえない高音域を、聞こえる音域（低音域）に移調して再生します。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	—
快適プログラム	周囲の音を抑え、快適性を重視したプログラムです。読書中など、集中したい時に適しています。	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リスニング プログラム	使用環境に応じて、聞こえ方のプログラム切替ができます。プログラムボタン付及びアプリ・リモコン対応モデルのみ。	5	4	3	3	5	4	3	3	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	2
後方指向性	背後からの音を積極的に聴く指向性です。CIC/CIC-Mには非搭載。	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サウンド ダイアリー	ユーザーの日常の音環境を自動的に記録します。今後のフィッティングに役立てます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
スマート スピーク	電池切れの警告や、補聴器のプログラムの状態などを日本語の音声で案内します。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—
電話プラス	電話の時に相手の声を両耳の補聴器で聞くことができます。MOMENT: BTE 312とプログラムボタン付きIM/IPのみ搭載。EVOKE: CIC-M、CIC、XP、RIC 10、F2、BTE 13 Dは非搭載。UNIQUE: CIC-M、CIC、XP、PAは非搭載。IM/IPはプログラムボタン付のみ搭載。	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

周辺機器対応一覧

製品名	MOMENT				EVOKE				UNIQUE			MAGNIFY				ENJOY			MENU
	sRIC R D/mRIC R D/ RIC 312 D/ BTE R D/BTE 13 D	RIC 10/ BTE 312	CIC-M	CIC/ XP/ IM/IP	F2/ BTE 13 D	RIC 10/ FM/FA/ FP	CIC-M	CIC/ XP/ IM/IP	PA/FS/ FM/FA/ FP	CIC- M	CIC/ XP/ IM/IP	mRIC R D/ RIC 312 D/ BTE R D/BTE 13 D	BTE 312/ BTE 13	CIC- M	CIC/ XP	FS	FM/ FA/ FP	XP	SP
TV-DEX	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	—
TV PLAY	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
RC-DEX	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	—
COM-DEX	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	(注)	●	●	●	●	—
FM+DEX	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	(注)	●	●	●	●	—
CROS	—	●	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●	(注)	●	●	●	●	—
RC4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●

(注) 30クラスを除く。

データ

データ

シリーズ・モデル別 スマートフォン対応一覧

概要	説明	MOMENT			EVOKE			MAGNIFY			ENJOY	
		耳あな型	RIC 10/ BTE 312	sRIC R D/ mRIC R D/ RIC 312 D/ BTE R D/BTE 13 D	耳あな型	RIC 10/ FM/FA/ FP	F2/ BTE 13 D	耳あな型	BTE 312/ BTE 13	mRIC R D/ RIC 312 D/ BTE R D/ BTE 13 D	耳あな型	FS/FM/ FA/FP
ダイレクト ストリーミング	電話に出ると相手の声が補聴器に直接届く。スマートフォンで再生した動画や音楽を補聴器で聞くことができる。(Androidは、ASHA対応端末のみ)	—	—	iPhone/ Android	—	—	iPhone	—	—	iPhone/ Android	—	—
スマートフォン アプリで 補聴器を操作	プログラム 変更	●	●	MOMENTアプリ / TONELINKアプリ	●	●	EVOKEアプリ / TONELINKアプリ	●	●	MAGNIFYアプリ / TONELINKアプリ	●	●
	音量調節	●	●	MOMENTアプリ / TONELINKアプリ	●	●	EVOKEアプリ / TONELINKアプリ	●	●	MAGNIFYアプリ / TONELINKアプリ	●	●
	方向の選択	●	●	MOMENTアプリ / TONELINKアプリ	●	●	EVOKEアプリ / TONELINKアプリ	●	●	MAGNIFYアプリ / TONELINKアプリ	●	●
	補聴器をさがす	—	—	MOMENTアプリ	—	—	EVOKEアプリ	—	—	MAGNIFYアプリ	—	—
	音質調整	—	—	MOMENTアプリ	—	—	EVOKEアプリ	—	—	MAGNIFYアプリ	—	—
	マイサウンド	—	—	MOMENTアプリ (MOMENT110非対応)	—	—	—	—	—	—	—	—
	サウンドセンス ラーン	—	—	MOMENTアプリ (MOMENT110非対応)	—	—	EVOKEアプリ (EVOKE110非対応)	—	—	—	—	—
	TV PLAY	—	—	MOMENTアプリ	—	—	EVOKEアプリ	—	—	MAGNIFYアプリ	—	—

(注) 30クラスは非対応。

便利なスマートフォンアプリでできること (画面イメージ)



※ スマホ画面は、アプリによって若干異なります。

アプリのダウンロード



※ スマートフォンの機種により使用できない場合がありますので予めご確認ください。
 ※ iPhone 6S以降 (iOS 13.3以降) で対応。 ※ Android 7.0以降、Bluetooth 4.2以降で対応。

シリーズ名	モデル名	レシーバー	90dB入力最大出力 (dB SPL)		最大音響利得	誘導コイル最大感度		使用電池	電池寿命連続時間 (約)
			HFA-OSPL90	最大OSPL90		HFA-FOG	HFA-MASL		
MOMENT 440 330 220 110	CIC-M/CIC	80	104	110	53	-	-	PR536 (10A)	110h
		90	113	116	56	-	-	PR536 (10A)	110h
	IM	-	109	114	55	-	-	PR41 (312)	145h
	IP	-	115	119	59	-	-	PR41 (312)	135h
	XP	-	115	120	59	85	-	PR41 (312)	145h
	RIC 10 (MRB0) 注1	S	103	107	52	-	-	PR536 (10A)	95h
		M	112	116	58	-	-	PR536 (10A)	90h
	RIC 312 D (MRB2D) 注1	S	103	108	52	80	-	PR41 (312)	160h
		M	111	115	57	86	-	PR41 (312)	150h
		P	121	123	61	90	-	PR41 (312)	140h
		HP	128	135	71	100	-	PR41 (312)	140h
	sRIC R D (MRR4D) 注1	M	115	117	59	-	-	充電電池	注2
		P	123	124	63	-	-	充電電池	注2
	mRIC R D (MRR2D) 注1	M	115	117	59	-	-	充電電池	注2
		P	123	124	63	-	-	充電電池	注2
	BTE 312 (MBB2) 注1	-	123	130	53	-	-	PR41 (312)	140h
	BTE R D (VC付) (MBR3D) 注1	-	127	136	62	91	-	充電電池	注3
BTE 13 D (VC付) (MBB3D) 注1	-	127	136	62	91	-	PR48 (13)	200h	
EVOKE 440 330 220 110	CIC-M/CIC	80	103	109	52	-	-	PR536 (10A)	110h
		90	112	116	55	-	-	PR536 (10A)	110h
	IM	-	108	113	55	-	-	PR41 (312)	150h
	IP	-	115	118	59	-	-	PR41 (312)	145h
	XP	-	115	119	60	84	-	PR41 (312)	145h
	RIC 10 (ERB0) 注1	S	103	107	52	-	-	PR536 (10A)	95h
		M	112	116	58	-	-	PR536 (10A)	90h
	F2 (FUSION2) 注1	S	104	109	53	80	-	PR41 (312)	160h
		M	113	116	57	86	-	PR41 (312)	150h
		P	121	123	61	90	-	PR41 (312)	140h
		HP	128	134	72	100	-	PR41 (312)	140h
	FM (FASHION MINI) 注1	-	123	130	54	-	-	PR41 (312)	140h
	BTE 13 D (VC付) (EBB3D) 注1	-	127	136	62	91	-	PR48 (13)	200h
	FA (VC付)(FASHION) 注1	-	126	133	59	89	-	PR41 (312)	140h
FP (VC付) (FASHION POWER)	-	128	135	65	97	-	PR48 (13)	240h	

注1: 各シリーズのRIC 10、FS、F2、sRIC R D、mRIC R D、RIC 312 D、FM、BTE 312、FA、BTE R D、BTE 13 D、BTE 13モデルは、ワイテック スプレックス (オプション別売) への対応が可能です。(取扱店へお問い合わせください)

注2: リチウムイオン充電電池の連続使用時間の目安は4時間の満充電で、約20時間です。(ストリーミング使用なし)

注3: リチウムイオン充電電池の連続使用時間の目安は4時間の満充電で、約36時間です。(ストリーミング使用なし)

シリーズ名	モデル名	レシーバー	90dB入力最大出力 (dB SPL)		最大音響利得	誘導コイル最大感度		使用電池	電池寿命連続時間 (約)
			HFA-OSPL90	最大OSPL90		HFA-FOG	HFA-MASL		
UNIQUE 440 330 220 110	CIC-M/CIC	80	103	109	52	-	-	PR536 (10A)	110h
		90	112	116	55	-	-	PR536 (10A)	110h
	IM	-	108	113	55	-	-	PR41 (312)	150h
	IP	-	115	118	59	-	-	PR41 (312)	145h
	XP	-	115	119	60	84	-	PR41 (312)	145h
	PA (PASSION) 注1	S	103	108	50	-	-	PR536 (10A)	95h
		M	111	114	55	-	-	PR536 (10A)	90h
	FS (FUSION) 注1	S	103	108	51	80	-	PR41 (312)	160h
		M	111	115	56	82	-	PR41 (312)	150h
		P	120	123	60	87	-	PR41 (312)	140h
		HP	128	134	71	99	-	PR41 (312)	140h
	FM (FASHION MINI) 注1	-	123	130	51	-	-	PR41 (312)	140h
	FA (VC付)(FASHION) 注1	-	126	132	58	85	-	PR41 (312)	140h
	FP (VC付) (FASHION POWER)	-	127	135	63	91	-	PR48 (13)	240h
MAGNIFY 100 50 30	CIC-M/CIC	80	104	110	53	-	-	PR536 (10A)	110h
		90	113	116	56	-	-	PR536 (10A)	110h
	XP	-	115	120	59	85	-	PR41 (312)	145h
	RIC 312 D (MRB2D) 注1	S	103	108	52	80	-	PR41 (312)	160h
		M	111	115	57	86	-	PR41 (312)	150h
		P	121	123	61	90	-	PR41 (312)	140h
		HP	128	135	71	100	-	PR41 (312)	140h
	mRIC R D (MRR2D) 注1	M	115	117	59	-	-	充電電池	注2
	P	123	124	63	-	-	充電電池	注2	
	BTE 312 (MBB2) 注1	-	123	130	53	-	-	PR41 (312)	140h
BTE R D (VC付) (MBR3D) 注1	-	127	136	62	91	-	充電電池	注3	
BTE 13 D/BTE 13 (VC付) (MBB3D/MBB3) 注1	-	127	136	62	91	-	PR48 (13)	200h	
ENJOY 100 50 30	XP	-	115	119	60	84	-	PR41 (312)	145h
		S	104	109	53	80	-	PR41 (312)	160h
	FS (FUSION) 注1	M	113	116	57	86	-	PR41 (312)	150h
		P	121	123	61	90	-	PR41 (312)	140h
		HP	128	134	72	100	-	PR41 (312)	140h
		FM (FASHION MINI) 注1	-	123	130	54	-	-	PR41 (312)
	FA (VC付)(FASHION) 注1	-	126	133	59	89	-	PR41 (312)	140h
	FP (VC付) (FASHION POWER)	-	128	135	65	97	-	PR48 (13)	240h
MENU SP	SP (VC付)	-	134	138	76	103	-	PR44 (675)	500h

※性能はJIS C5512:2015に準拠しています。(通常使用時は数値が異なる場合があります) ※オーダーメイド補聴器は、耳あなの形状や難聴の程度によって適合しない場合があります。※VCはボリュームコントロールのことです。※空気電池や充電電池の電池寿命は、補聴器の設定や使用状況によって変わることがあります。また、季節によっても変化することがあります。(1日当たりの使用時間が短い場合や冬など低温で乾燥した条件で使用した場合、電池寿命は表示より短くなる場合があります) ※ストリーミングなど他の機器と通信して使用した場合、空気電池や充電電池の電池寿命が短くなります。

保証とアフターサービス

有償オプション **なし** の場合

ご購入日		1～2年目	3年目	4年目
Widex Reward [ワイデックス リワード] MOMENT 440	修理保証 (修理不可能な場合を除き、すべての故障が対象)	あんしん修理	紛失補償 3年間で1回	あんしん修理
	+		耳かけ型カラーケース無償交換 3年間で1回	
+	耳あな型シェル再作無償 3年間			
+				
プレミアム サービス EVOKE 440 UNIQUE 440	修理保証 (過失等による故障を除く)	あんしん修理	紛失補償 3年間で1回	あんしん修理
	+			
プレミアム サービス MOMENT 330 EVOKE 330	修理保証 (過失等による故障を除く)	あんしん修理	紛失補償 2年間で1回	あんしん修理
	+			
上記以外の 器種 (総合支援法対象 モデルを除く)	修理保証 (過失等による故障を除く)	あんしん修理		あんしん修理

ご購入後も安心してお使いいただくために、
ワイデックスでは充実したアフターサービスをご用意しています。

- 「修理保証」期間内に生じた自然故障についての修理は無償で対応します。
WidexReward対象器種は、過失による故障も保証対象となります。
※ DEXリモコン、RC4リモコンは1年保証です。
※ RICタイプのレシーバー、イヤワイヤ、およびイヤワイヤ付レシーバーは2年保証です。
※ MOMENT440/EVOKE440/UNIQUE440のイヤワイヤ付レシーバーは3年保証です。
※ 充電式補聴器の充電器は1年保証です。
※ ケース、フック、電池等の付属品や、イヤモールド、イヤチップ等のアクセサリ類は保証対象外となります。
※ 修理費用は非課税です。
- 「紛失補償」は、補聴器を紛失された場合に、対象期間中に限り、同等品を提供します。
警察署や交番で遺失届を提出し、受理番号を控えて、購入されたお店にご連絡ください。
- 「あんしん修理」の際のご負担金額は最大2万円まで。
アンプが含まれる修理については、最大5万円となる場合があります。

以下のような場合には保証対象外となります

- 修理依頼時に、保証書の提示が無かった場合。
- お客様、または第三者が故障原因であった場合。*
- 取扱説明書、カタログ等の使用説明によらない使用状態での故障。*
- 天変地異、異常気象が故障原因であった場合。*

*WidexReward対象商品を除く。

オーダーメイド補聴器の形状が、耳に合わない場合の無償再製作について

- ご購入より1年以内であれば無償で再製作いたします。
WidexReward対象器種は保証期間内無償となります。

さらに安心の有償オプションもご用意しております。

▶ 詳しくは次のページをご覧ください。

WidexRewardの詳細は、P98-99をご覧ください。

保証とアフターサービス

有償オプション **あり** の場合

ご購入日

1～2年目

3年目

4年目

Widex
Reward
[ワイデックス
リワード]
MOMENT 440

修理保証 (修理不可能な場合を除き、すべての故障が対象)
+
紛失補償 4年間で2回
+
耳かけ型カラーケース無償交換 4年間で1回
+
耳あな型シェル再作無償 4年間

プレミアム
サービス
EVOKE 440
UNIQUE 440

修理保証
(過失等による故障を除く)
+
紛失補償 4年間で2回

プレミアム
サービス
MOMENT 330
EVOKE 330

修理保証
(過失等による故障を除く)
+
紛失補償 3年間で2回

あんしん修理

上記以外の
器種
(総合支援法対象
モデルを除く)

修理保証
(過失等による故障を除く)
+
紛失補償 3年間で1回

あんしん修理

ご愛用の補聴器にさらなる安心を。 『1年延長保証・紛失補償』(有償オプション)

片耳: 20,000円(非課税) / 両耳: 40,000円(非課税)

- 「修理保証」期間を1年間延長いたします。
 - 「紛失補償」が1回分追加となります。(延長期間を含む「修理保証」期間中にご利用いただけます。)
- ※WidexReward対象器種のカラーケース交換は4年間で1回のみ、シェル再作無償は4年間となります。



補聴器本体のご購入時のみ、ご加入いただけます。片耳の有償オプションご購入で両耳の補聴器を対象にすることはできません。総合支援法対象モデルには適用できません。

- 「修理保証」期間内に生じた自然故障についての修理は無償で対応します。
WidexReward対象器種は、過失による故障も保証対象となります。
※ DEXリモコン、RC4リモコンは1年保証です。
※ RICタイプのレシーバー、イヤワイヤ、およびイヤワイヤ付レシーバーは2年保証です。
※ MOMENT440/EVOKE440/UNIQUE440のイヤワイヤ付レシーバーは3年保証です。
※ 充電式補聴器の充電器は1年保証です。
※ ケース、フック、電池等の付属品や、イヤモールド、イヤチップ等のアクセサリ類は保証対象外となります。
※ 修理費用は非課税です。
- 「紛失補償」は、補聴器を紛失された場合に、対象期間中に限り、同等品を提供します。
警察署や交番で遺失届を提出し、受理番号を控えて、購入されたお店にご連絡ください。
- 「あんしん修理」の際のご負担金額は最大2万円まで。
アンプが含まれる修理については、最大5万円となる場合があります。

以下のような場合には保証対象外となります

- 修理依頼時に、保証書の提示がなかった場合。
- お客様、または第三者が故障原因であった場合。*
- 取扱説明書、カタログ等の使用説明によらない使用状態での故障。*
- 天変地異、異常気象が故障原因であった場合。* ※WidexReward対象商品を除く。

オーダーメイド補聴器の形状が、耳に合わない場合の無償再製作について

- ご購入より1年以内であれば無償で再製作いたします。
WidexReward対象器種は保証期間内無償となります。

WidexRewardの詳細は、P98-99をご覧ください。



[ワイデックス リワード] WidexReward

ワイデックスの最上位補聴器に より大きな満足を。

デンマークで生まれたワイデックスは、補聴器に数々の技術革新を起こし、支持されてきました。そこには、「音を補う」こと以上に、「人生を楽しく、快適にする」ことを追求するという理念があります。

ワイデックスの高性能、高機能な補聴器に、より満足いただける価値を。最上位モデルをご購入いただいたお客様に、さらに大きな安心を提供するプログラム「ワイデックス リワード」。

従来のアフターサービスに加えて、より充実したサポートをご提供します。

ワイデックス リワード対象器種

WIDEX MOMENT™ 440 全モデル

※対象器種は、予告なく変更となる場合があります。詳しくは店頭でご確認ください。

ワイデックス リワード特典

- 保証期間内に生じた、いかなる故障であっても無償で修理対応いたします。
※修理不可能と判断した場合は除きます。
- 耳かけ型は、お好みのカラーへのケース無償交換を承ります。(保証期間中1回まで)
- 耳あな型の形状が耳に合わない場合のシェル再作が保証期間中無償となります。
- ワイデックス リワード特典を記載した購入者だけの専用カードをご用意。



専用カード

有償オプション「1年延長保証・紛失補償」を購入された場合

- 延長保証期間中もあらゆる故障が無償修理の対応となります。
※修理不可能と判断した場合は除きます。
- カラーケースの無償交換は延長期間を含む4年間で1回までとなります。
- 耳あな型のシェル再作の無償期間も1年延長となります。

ワイデックスリワードの最新情報は弊社Webサイトにてご確認ください。

<https://www.widex.com/ja-jp/local/ja-jp/reward/>

